



Kompendium



Gothaplast® — ein GROSSES kleines UNTERNEHMEN

herausfordernd im Wettbewerb durch Qualität und Innovation. Gothaplast® ist vor allem etwas sehr persönliches: ein engagiertes Team von Männern und Frauen mit Werten und internationalem Horizont, traditionell fokussiert auf

Wundversorgung und transdermale Systeme.

Gothaplast® — a GREAT little COMPANY

challenging with quality and imagination. Gothaplast® is above all something very personal: a team of men and women with values and international horizon focusing on unique quality of

wound-care and transdermal systems.

Gothaplast® wurde im Mai 1944 in der Residenzstadt Gotha von dem Schweizer Pharmazeuten Hans C. Wirz, Schwiegersohn von Carl Blank, als weitere Produktionsstätte der Carl Blank KG Verbandpflasterfabrik, Bonn/Rhein, gegründet.

Gothaplast® was founded in May 1944 by the Swiss entrepreneur Hans C. Wirz, son-in-law of Carl Blank, as a production plant of Carl Blank KG Verbandpflasterfabrik, Bonn/Rhein.



Gothaplast-Betriebsstätte, Hans-C.-Wirz-Straße 2, D-99867 Gotha



Gothaplast Postfach 10 01 32, 99851 Gotha

Telefon: 0 36 21 30 65 0, Fax: 0 36 21 30 65 30

E-mail: info@gothaplast.de, Internet: www.gothaplast.de

Wundpflaster / Wound Plasters

• standard/Textil / <i>Standard/Textile</i>	4 / 5
• elastisch/Textil / <i>Elastic/Textile</i>	4 / 5
• Comfort und sensitiv / <i>Comfort and Sensitive</i>	6 / 7
• wasserabweisend • robust / <i>Water Repellent • Robust</i>	6 / 7
• GoTa-POR® steril / <i>GoTa-POR® Sterile</i>	8 / 9
• GoTa-POR PU-Wundfilm steril / <i>GoTa-POR® PU-Woundfilm Sterile</i>	8 / 9
• GoTa-POR® Wundnahtstreifen steril / <i>GoTa-POR® Skin Closure Strips Sterile</i>	10 / 11
• GoTa-POR® Kanülenpflaster steril / <i>GoTa-POR® IV (Intravenous) Attachment Sterile</i>	10 / 11
• GoTa-DERM® thin steril, foam steril / <i>GoTa-DERM® Thin Sterile, Foam Sterile</i>	12 / 13
• GoTac® HydroGel-Pflaster, steril / <i>GoTac® Hydrogel-Dressing, Sterile</i>	14 / 15
• OsMo-med Ag, steril / <i>OsMo-med Ag, Sterile</i>	16 / 17
• GoTa-sorb, steril / <i>GoTa-sorb, Sterile</i>	16 / 17
• GoTa-tül / <i>GoTa-tül</i>	18 / 19
• Saugkomresse / <i>Saugkomresse</i>	18 / 19
• GoTa-FILM steril / <i>GoTa-FILM Sterile</i>	20 / 21
• GoTa-silber Wundpflaster steril / <i>GoTa-silver Wound Dressing Sterile</i>	22 / 23

Spezialpflaster / Special Plasters

• ZIP-Strip® Wundpflaster, wasserabweisend / <i>ZIP-Strip® Wound Dressing, Water Repellent</i>	24 / 25
• Gotha-PAD's Zellstoff-Tupfer / <i>Gotha-PAD's Cotton pads</i>	24 / 25
• Mischboxen / <i>Mixed boxes</i>	26 / 27
• Kinderpflaster, Colourpflaster / <i>Children's Plaster, Colour Plaster</i>	26 / 27
• Blasenpflaster / <i>Blister Plaster</i>	28 / 29
• GoTac® HydroGel-Pflaster / <i>GoTac® Hydrogel-Plaster</i>	28 / 29
• Wundpflaster transparent / <i>Wound Plaster Transparent</i>	30 / 31
• Wundpflaster soft Vlies / <i>Wound Plaster Soft Fleece</i>	30 / 31
• Gotha-FIX® stretch / <i>Gotha-FIX® Stretch</i>	32 / 33
• Dusch-Pflaster XL / <i>Shower Plaster XL</i>	32 / 33
• Fingerkuppenpflaster mit Fingerling / <i>Fingertip Plaster with Finger cots</i>	34 / 35
• Fingerverbände / <i>Finger Plaster</i>	34 / 35

Hygiene / Hygiene

• Saniflex® Fingerlinge / <i>Saniflex® Finger Cots</i>	34 / 35
• Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe / <i>Rotpunkt® Examination Gloves</i>	
Latex, Nitril / <i>Latex, Nitril</i>	36 / 37
Vinyl, Vinyl soft / <i>Vinyl, Vinyl Soft</i>	38 / 39

Medizinische Pflaster / Medical Plasters

• Capsi-med® Wärmepflaster / <i>Capsi-med® Heat Plaster</i>	40 / 41
• Hühneraugenpflaster, Hornhautpflaster / <i>Corn Remover, Callus Remover</i>	40 / 41

Heftpflaster / Adhesive Tapes

• Heftpflaster standard / <i>Adhesive Tape Standard</i>	42 / 43
• Heftpflaster Vlies / <i>Adhesive Tape Fleece</i>	42 / 43
• Gotha-SILK Heftpflaster Seide / <i>Gotha-SILK Adhesive Tape Silk</i>	44 / 45
• Gotha-FLEX Heftpflaster transparent / <i>Gotha-FLEX Adhesive Tape Transparent</i>	44 / 45
• Gothaplast® Verkaufspräsentationen / <i>Gothaplast® Sales Presentations</i>	46
• Gothaplast® Akademie / <i>Gothaplast® Academy</i>	47

Wundpflaster standard/Textil / Wound Plaster Standard/Textile



Anwendungsgebiete:

- Starres Textilpflaster für die schnelle und einfache hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
- Zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riß- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- Rigid woven plaster for the rapid and simple hygienic treatment of daily-life injuries
- Cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts

Wundpflaster elastisch/Textil / Wound Plaster Elastic/Textile



Anwendungsgebiete:

- Textilpflaster für Verletzungen im Alltag an konturierten, beweglichen Körperstellen und Gelenken
- Zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riß- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- Elastic woven plaster for daily-life injuries on mobile parts of the body and joints
- Cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts



Produkteigenschaften:

- Vielseitig verwendbares Textilpflaster mit Zinkoxid Naturkautschuk-Klebmasse bzw. Synthetikautschuk
- Das Viskosegewebe und die für Gothaplast typische Perforation lassen Luft ungehindert durchdringen.
- Die Wundaufgabe verklebt nicht mit der Wunde.

Properties:

- *Versatile applicable textile plaster with zinc oxide natural caoutchouc adhesive or synthetic caoutchou*
- *Viscose woven and the typical Gothaplast perforation allows for air-permeability*
- *Wound pad does not stick to the wound*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm

4951270	1 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951287	50 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951293	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951318	1 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

zum Zuschneiden / for individual cutting

7393089	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
---------	------------	----------------------------

Rolle in Spenderschachtel / Dispencer Box

4951324	5 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951330	5 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951347	5 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box



Produkteigenschaften:

- Vielseitig verwendbares elastisches Textilpflaster
- Die Wundaufgabe verklebt nicht mit der Wunde.
- Luftdurchlässig
- Hautverträglich und zuverlässig klebend

Properties:

- *Versatile applicable elastic textile plaster*
- *Wound pad does not stick to the wound*
- *Air-permeable*
- *Skin friendly and reliably sticking*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm

4951376	1 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951382	50 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951399	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951413	1 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

Rolle in Spenderschachtel / Dispencer Box

4951436	5 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951442	5 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951459	5 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

Injektionspflaster / Injection Plaster

4079122	1,25 cm x 4 cm	350 Abschn./FS / strips per box
4079139	2,00 cm x 6 cm	220 Abschn./FS / strips per box

Wundpflaster Comfort und sensitiv (hypoallergen) / Wound Plaster Comfort and



Anwendungsgebiete:

- Versorgung kleiner Verletzungen bei besonders empfindlicher Haut
- Zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riß- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- Treatment of small injuries for particularly sensitive skin
- Cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts

Wundpflaster wasserabweisend • robust / Wound Plaster Water Repellent •



Anwendungsgebiete:

- Zur Versorgung von kleinen Verletzungen, die Verschmutzungen in feuchter Umgebung ausgesetzt sind
- Zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riß- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- Dirt and water repellent woven plaster for small injuries, which are exposed to dirty and moist surroundings
- Cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts



Produkteigenschaften:

- Sanft und anschmiegsam durch querelastisches, besonders weiches Polyester-Vliesmaterial
- Wundpflaster Comfort ist besonders hautfreundlich durch hypoallergene Polyacrylat-Klebmasse.
- Wundpflaster sensitiv mit Synthetikgummi-Klebmasse
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- Hautfreundlich und zuverlässig klebend
- Hohe Luftdurchlässigkeit

Properties:

- Soft and conformable through transverse elastic, especially soft polyester fleece material
- Wound Plaster Comfort is particularly skin friendly due to hypoallergenic polyacrylate adhesive
- Wound Plaster Sensitive with a synthetic caoutchouc adhesive mass
- Wound pad does not stick to the wound
- Skin friendly and reliably sticking; highly air-permeable

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

Wundpflaster Comfort / Wound Plaster Comfort

1589762	2 Größen / Sizes	20 Strips/FS / strips per box
	70 mm x 24 mm	12 Strips / strips per box
	70 mm x 48 mm	8 Strips / strips per box

Wundpflaster Mini sensitiv / Wound Plaster Mini Sensitiv

5954879	4 cm x 1,7 cm	20 Strips/FS / strips per box
---------	---------------	-------------------------------

Wundpflaster sensitiv / Wound Plaster Sensitiv

geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm

4951175	1 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951181	50 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951198	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951206	1 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

Rolle in Spenderschachtel / Dispenser Box

4951212	5 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951229	5 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
4951235	5 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

Injektionspflaster / Injection Plaster

4114025	4 cm x 1,7 cm	400 Abschn./FS / strips per box
---------	---------------	---------------------------------



Produkteigenschaften:

- Vielseitig verwendbares Polyethylen-Folienpflaster
- Das Trägermaterial ist schmutz- und wasserabweisend.
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- Luftdurchlässig
- Hautverträglich und zuverlässig klebend

Properties:

- Versatile applicable polyethylene-film plaster
- The backing material is dirt and water repellent
- Wound pad does not stick to the wound
- Air-permeable
- Skin friendly and reliably sticking

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm

7464754	1 m x 4 cm	10 Abschn./FS / strips per box
7464760	50 cm x 6 cm	5 Abschn./FS / strips per box
7464777	1 m x 6 cm	10 Abschn./FS / strips per box
7464808	1 m x 8 cm	10 Abschn./FS / strips per box

Strips/Abschnitte / Individually wrapped strips

4051738	2 cm x 6 cm	10 Strips / strips
4580017	4 Größen / Sizes	18 Stück/FS / piece per box
	2,5 cm x 7,2 cm	2 Strips / strips
	1,9 cm x 7,2 cm	6 Strips / strips
	1,6 cm x 5,5 cm	6 Strips / strips
	9 cm x 3,8 cm	4 Strips / strips

GoTa-POR® Wundpflaster steril (hypoallergen) / GoTa-POR® Wound Dressing



Anwendungsgebiete:

- Als steriler Folgeverband nach chirurgischen Eingriffen oder Unfallverletzungen

Fields of application:

- Sterile wound dressing after surgery or accident injuries

GoTa-POR® PU-Wundfilm steril / GoTa-POR® PU-Woundfilm Sterile



Anwendungsgebiete:

- Als steriler wasserdichter Wundverband für die Versorgung sezernierender Wunden.

Fields of application:

- Sterile waterproof dressing for the treatment of exuding wounds



Produkteigenschaften:

- Querelastisches Polyester-Vlies
- Zentrale Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
- Umlaufende Klebefläche schützt Wunde von allen Seiten
- Hautverträglich und zuverlässig klebend
- Hohe Luftdurchlässigkeit

Properties:

- *Transversely elastic polyester fleece*
- *Central wound pad does not stick to the wound*
- *Continuous adhesive border gives allround wound protection*
- *Skin-friendly and reliably sticking; highly air-permeable*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
4473250	50 mm x 72 mm	1 Stück / dressing
4473296	100 mm x 60 mm	1 Stück / dressing
4473600	100 mm x 80 mm	1 Stück / dressing
4473646	150 mm x 100 mm	1 Stück / dressing
4473669	200 mm x 100 mm	1 Stück / dressing
4473681	250 mm x 100 mm	1 Stück / dressing
4473706	300 mm x 100 mm	1 Stück / dressing

Klinikverpackungen / Hospital Packs

4473273	50 mm x 72 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4473592	100 mm x 60 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4473623	100 mm x 80 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4473652	150 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4473675	200 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4473698	250 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4473712	300 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4473267	50 mm x 72 mm	5 Stück/FS / dressings per box
4473617	100 mm x 80 mm	5 Stück/FS / dressings per box

GoTa-POR® PU-Wundfilm steril / GoTa-POR® PU-Woundfilm Sterile



Produkteigenschaften:

- Keim- und wasserdicht
- Transparentes, atmungsaktives Trägermaterial
- Paßt sich den Körperkonturen gut an.

Properties:

- *Impermeable to microorganisms and waterproof*
- *Transparent, air-permeable backing material*
- *Conforms well to the body contours*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
3942122	50 mm x 72 mm	1 Stück / dressing
3942151	100 mm x 60 mm	1 Stück / dressing
3942168	150 mm x 100 mm	1 Stück / dressing

Klinikverpackungen / Hospital Packs

3182450	50 mm x 72 mm	50 Stück/FS / dressings per box
3182504	100 mm x 60 mm	50 Stück/FS / dressings per box
3182585	150 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
0468424	50 mm x 72 mm	5 Stück/FS / dressings per box
0468447	100 mm x 60 mm	5 Stück/FS / dressings per box
0468476	150 mm x 100 mm	5 Stück/FS / dressings per box

GoTa-POR® Wundnahtstreifen steril / GoTa-POR® Skin Closure Strips Sterile



Anwendungsgebiete:

- Steriler Folgeverband nach chirurgischen Eingriffen
- Bei Schnittwunden als Ersatz der Hautnaht
- Zur Unterstützung und Entlastung von Nähten und Klammern
- Fixierung von Hauttransplantaten

Fields of application:

- Sterile strip after surgical intervention
- For cuts as substitute for sutures
- Support and relief of sutures and clips
- Securing of skin grafts

GoTa-POR® Kanülenpflaster steril / GoTa-POR® IV (Intravenous) Attachment



Anwendungsgebiete:

- Zur Fixierung peripherenöser Verweilkannülen/-katheter, die in oberflächliche, subkutan gelegene Venen am Unterarm o.ä. eingebracht sind

Fields of application:

- Securing of peripheral venous cannulae and catheters in subcutaneously placed veins at the for arm or similar sites



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
4674847	76 mm x 3 mm	5 Stück/Beutel / strips per pouch
4674853	76 mm x 6 mm	3 Stück/Beutel / strips per pouch

Klinikverpackungen / Hospital Packs

4674882	76 mm x 3 mm	50 Stück a. 5 Streifen/FS / pieces á 5 strips per box
4674899	76 mm x 6 mm	50 Stück a. 3 Streifen/FS / dressings per box

Produkteigenschaften:

- Zugfestes starres Polyestervlies
- Optimale Wundrandadaption für kosmetisch unauffällige Narben
- Hautverträglich und zuverlässig klebend
- Luftdurchlässig

Properties:

- *Tensionproof rigid polyester fleece*
- *Optimum wound edge adaption for cosmetically acceptable scars*
- *Skin friendly and reliably sticking*
- *Air-permeable*

Sterile

GoTa-POR® Kanülenpflaster steril / GoTa-POR® IV Attachment Sterile



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
4473729	80 mm x 58 mm	1 Stück / pouch

Klinikverpackungen / Hospital Packs

4473735	80 mm x 58 mm	50 Stück/FS / pouches per box
---------	---------------	-------------------------------

Produkteigenschaften:

- Sanftes querelastisches Polyester-Vlies mit hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- Saugfähige zentrale Wundaufgabe oder zur Polsterung des Kanülenschafte
- Hohe Luftdurchlässigkeit; hautverträglich und zuverlässig klebend
- Schmerzlos und rückstandsfrei zu entfernen

Properties:

- *Soft transversely elastic polyester fleece with hypoallergenic polyacrylate adhesive*
- *Absorbent central wound pad for cushioning of the cannula shaft*
- *Highly air-permeable; skin friendly and reliably sticking*
- *Can be removed painlessly and leaves no residues*



Anwendungsgebiete:


- Zur Versorgung von Hautgeschwüren der Stufe I - II (Decubitus und venösem Ulcus)
- Verbrennungen I. und II. Grades
- Sekundärverband für Füllmaterial
- Folgeverbände bei chirurgischen Eingriffen und Unfallverletzungen z.B. bei der Spalthautentnahme, bei der Wundversorgung nach Endoskopie, bei der plastischen Chirurgie, bei Schürfwunden (bis ins Fettgewebe)
- Verwendung als Schutzverband z.B. bei Diabetikern zur normalen Wundbehandlung anstatt diverser Wundpflaster
- Nicht anwenden bei sehr tiefen Biß- und Stichwunden, bei arteriellem Ulcus, bei freiliegenden Knochen und Sehnen
- foam: vorbeugend zur Druckentlastung bei Decubitus

Fields of application:


- Treatment of dermal ulcers degree I and II (decubitus and venous ulcers)
- Burns of 1st and 2nd grade
- Secondary dressing over hydrocolloid filling material
- Surgical incisions and accident injuries, covering donor sites after split skin grafting, after endoscopy, plastic surgery, abrasions (as far as adipose tissue)
- Protective dressing e.g. for diabetics as normal wound care instead of various dressings
- Do not use in the treatment of very deep bites and stab wounds, arterial ulcer, wounds where tendons and bones are exposed
- foam: prophylactic pressure release with decubitus




hydroaktiv
hydroactive

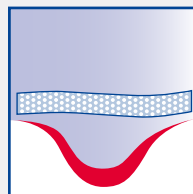

selbsthaftend
self adhesive

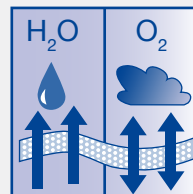

sauerstoff- und
wasserdampf-
durchlässig
permeable to
oxygen and
water vapour

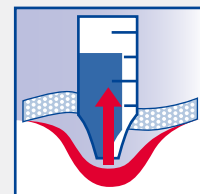

hohes Aufnah-
mevermögen
high absorptive
capacity

**Lieferformen / How supplied**

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

GoTa-DERM® thin

0166522	10 cm x 5 cm	1 Stück / piece
0166539	10 cm x 10 cm	1 Stück / piece
0166545	15 cm x 15 cm	1 Stück / piece

Klinikverpackungen / Hospital Packs

0176360	10 cm x 5 cm	10 Stück/FS / pieces per box
8880041	10 cm x 10 cm	10 Stück/FS / pieces per box
0176377	10 cm x 10 cm	5 Stück/FS / pieces per box
0176383	15 cm x 15 cm	5 Stück/FS / pieces per box

GoTa-DERM® foam

1340382	10 cm x 10 cm	1 Stück / piece
---------	---------------	-----------------

Klinikverpackungen / Hospital Packs

1308295	10 cm x 10 cm	5 Stück/FS / pieces per box
---------	---------------	-----------------------------

Produkteigenschaften:

- Das Trägermaterial für GoTa-DERM® hydrokolloides Wundpflaster steril thin ist eine Polyurethanfolie und bei foam ein Polyurethanschaum
- Als Haftklebstoff wird ein drucksensibler, permanent klebender, hypoallergener Haftklebstoff eingesetzt (Butylkautschuk, SIS-Copolymer, Polyisobutylene, Syntheseharze).
- Die in der Matrix eingearbeiteten Hydrokolloide sind Carboxymethylcellulose und Pektin.
- Als Schutz wird das Pflaster mit einem weißen siliconisierten Papier abgedeckt.
- Undurchlässigkeit für Mikroorganismen von außen
- Entfernung überschüssiger Wundflüssigkeit
- Haltung eines feuchten Klimas im Wundbereich
- Gewährleistung von Gasaustausch
- Blutgefäßneubildung wird induziert
- Entfernung ist schmerzfrei und atraumatisch, der Verband soll dabei überdehnt werden.
- Keine Hinterlassung von Haftklebstoffrückständen
- Extra dünn (0,5 mm - 2,5 mm) und flexibel
- Gute Klebkraft; muß beim Duschen nicht abgenommen werden
- Gute, optimale Narbenbildung
- Kostenbeeinflussung durch nicht zu häufig notwendigen Verbandwechsel und durch Pflegezeitersparnis
- thin: transparent; die Wunde läßt sich gut beobachten
- foam: der Wundverband läßt sich gut anmodellieren, besonders an Problemzonen wie Ellenbogen, Knie, Knöchel, Ferse oder Zehen und bei abgemagerten Patienten.

Properties:

- The backing material of GoTa-DERM® hydrocolloid wound dressing sterile thin is a polyurethane film and that of GoTa-DERM® foam is a polyurethane foam
- The adhesive mass is pressure sensitive, permanently sticking and transparent and consists of butyl caoutchouc, SIS-copolymer, polyisobutylene and synthetic resins
- The hydrocolloids in the matrix are carboxy-methylcellulose and pectin
- For protection the dressing is covered with a white siliconised paper
- Impermeable to micro-organisms from outside
- Removal of excess wound exudate
- Maintenance of a moist wound environment
- Allows for gaseous exchange
- Formation of new blood vessels is induced
- Removal is painless and atraumatic and the dressing should be overstretched for removal
- Does not leave adhesive residues
- Extra thin (0.5 - 2.5 mm) and flexible
- Good adhesiveness; can be worn during showering
- Good and cosmetically acceptable scar formation
- Cost-effectiveness through less frequent dressing changes and saving of care time
- thin: transparent, easy observation of the wound
- foam: the dressing can be easily contoured particularly to problem zones such as elbows, knees, ankles, heels or toes and emaciated persons



Anwendungsgebiete:


- Für alle Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase
- Modernste Versorgung zur Druck- und Schmerzlinderung
- Für Blasen, Schnitt- und Schürfwunden

Fields of application:


- For all wounds in the granulation and epithelialization phases
- Modern treatment for pressure relief and pain alleviation
- For blisters, cuts and abrasions







hydroaktiv
hydroactive

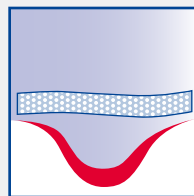


selbsthaftend
self adhesive

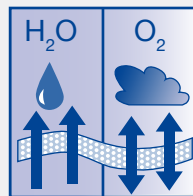

sauerstoff- und
wasserdampf-
durchlässig
*permeable to
oxygen and
water vapour*

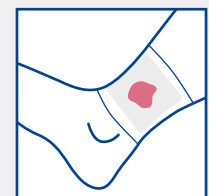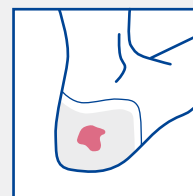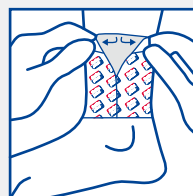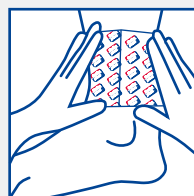

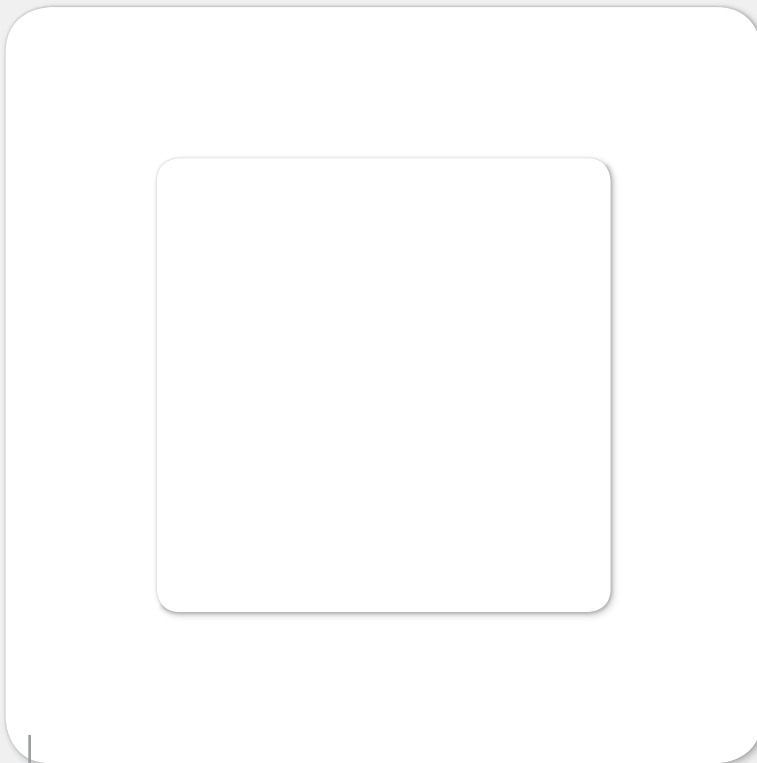**Lieferformen / How supplied**

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
1990068	10 cm x 10 cm	5 Stück/FS / pieces per box
1990370	10 cm x 10 cm	1 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- Das Trägermaterial für GoTac® HydroGel-Pflaster ist ein transparenter, hauchdünner Polyurethan-Film.
- Als Haftklebstoff wird ein transparenter, hypoallergener Haftklebstoff eingesetzt.
- Das HydroGel besteht aus Wasser, Glycerol und Polymeren.
- GoTac® HydroGel-Pflaster basiert auf dem Prinzip der feuchten Wundheilung, fördert eine schnelle Heilung und beugt einer Narbenbildung vor.
- Aufnahme von Wundsekret ohne die Wunde auszutrocknen
- Gute Wundbeobachtung durch hohe Transparenz
- Verklebt nicht mit der Wunde, läßt sich schmerzlos entfernen

Properties:

- The carrier material of GoTac® HydroGel-Dressing is a transparent, extremely thin polyurethane film
- The adhesive is transparent and hypoallergenic
- The hydrogel consists of water, glycerol and polymers
- GoTac® HydroGel-Dressing is based on the principle of moist wound healing, stimulates rapid healing and guards against scar formation
- Absorption of wound exudate without desiccating the wound
- Easy wound observation via high transparency
- Does not stick to the wound and removal is painless



OsMo-med Ag steril, Wundauflage mit Kapillarwirkung / OsMo-med Ag Sterile,



Anwendungsgebiete:

- OsMo-med Ag ist für die Behandlung von stark exsudierenden Wunden mit Infektionsrisiko, chirurgischen Wunden, Druckgeschwüren, OP-Wunden, Karzinome mit normaler Wundumgebung und bei Verbrennungen geeignet.

Fields of application:

- OsMo-med Ag is indicated for the treatment of heavily exuding wounds at risk from infection, surgical wounds, pressure ulcers, operation sites, carcinoma with intact wound surroundings and burns.

GoTa-sorb steril, Calciumalginat Wundauflage / GoTa-sorb Sterile, Calcium



Anwendungsgebiete:

- GoTa-sorb ist geeignet für die Versorgung von stark sezernierenden Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase, für oberflächliche und tiefe Wunden.

Fields of application:

- GoTa-sorb is suitable for the treatment of heavily exuding wounds during the cleaning and granulation phase; for superficial and deep wounds.



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Art Type	Inhalt Content
9300790	7,5 cm x 7,5 cm	Wundpflaster / Wound Plaster	5 Stück/FS / pieces per box
9300809	15 cm x 15 cm	Wundpflaster / Wound Plaster	10 Stück/FS / pieces per box
9300815	12 cm x 10 cm	Wundaufgabe / Wound	10 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- OsMo-med Ag nimmt durch die kapillare Polymerstruktur in kurzer Zeit große Mengen Flüssigkeit auf und speichert diese ohne die Wunde auszutrocknen. Da das Wundexsudat durch die Auflage aufgenommen und unter Druck zuverlässig eingeschlossen wird, kann OsMo-med Ag auch unter einem Kompressionsverband getragen werden. OsMo-med Ag selbstklebend ist flexibel und sehr komfortabel und an den äußeren Rändern mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Klebstoff beschichtet.

Properties:

- *Due to the capillary polymer structure, OsMo-med Ag absorbs large amounts of fluids within a short time and retains these without drying out the wound. OsMo-med Ag can also be used under compression bandages, because the absorbed wound exudate is reliably locked up even under pressure. OsMo-med Ag self-adhesive is flexible and highly comfortable coated with a super tolerated polyacrylate adhesive at the outer edges.*



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
6979628	10 cm x 10 cm	10 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- GoTa-sorb Calciumalginat Wundaufgabe ist eine hoch flexible, sehr weiche, anschmiegsame Wundabdeckung, die sich hervorragend jeder Wundkontur anpasst. Die Calciumalginat-Fasern reagieren mit Wundexsudat oder Blut und bilden ein weiches, feuchtes Gel. Die vernetzte Struktur des Produktes erlaubt ein atraumatisches Entfernen des Gels in einem Stück.

Properties:

- *GoTa-sorb calcium alginate wound pad is a highly flexible, very soft and supple wound dressing which conforms excellently to the contours of every wound. The calcium alginate fibres react with wound exudate or blood and form a soft and moist gel. The interlaced structure of the product allows for the atraumatic removal of the gel in one piece.*

GoTa-tül / GoTa-tül



Anwendungsgebiete:

- GoTa-tül kann für trockene bis stark sezernierende Wunden eingesetzt werden, bei denen ein Verkleben von Wundoberfläche und Verbandmaterial verhindert werden soll, z.B. bei Verbrennungen, Schürf- und Risswunden sowie Hauttransplantationen.

Fields of application:

- GoTa-tül can be used for dry to highly exuding wounds where the wound surface and the dressing should not stick together, e.g. burns, abrasions and lacerations and skin transplantation.

Saugkomresse steril / Absorbent pads Sterile




Anwendungsgebiete:

- Wird speziell für die Versorgung stark sezernierender Wunden eingesetzt oder als gut polsternde Saugkomresse in Kombination mit imprägnierten Wundgazen (GoTa-tül).

Fields of application:

- Is indicated for the management of highly exuding wounds or as a cushioning pad in combination with impregnated gauze dressings (GoTa-tül).

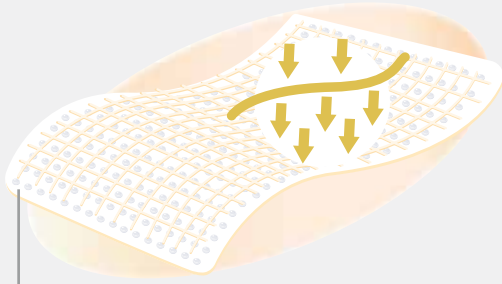**Lieferformen / How supplied**

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
3673886	10 cm x 7,5 cm	10 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- GoTa-tül ist eine nichthaftende, wirkstofffreie Wundauflage mit Vaseline getränkt.

Properties:

- *GoTa-tül is a non-adhesive, non-medicated wound dressing soaked with petroleum jelly.*

Saugkomresse steril / Absorbent pads Sterile

**Lieferformen / How supplied**

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
6706385	10 cm x 10 cm	50 Stück/FS / pieces per box
6706391	10 cm x 20 cm	25 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- Gothaplast® Saugkomresse ist eine rundum geschlossene, anschmiegsame Komresse mit hohem Saugvermögen.
- Wundschonend durch die besonders weiche Vliesumhüllung mit rückseitigem Wäscheschutz.

Properties:

- *Gothaplast® absorbent pad is an all-round covered, smooth pad with high absorptive capacity.*
- *Kind to the wound due to the extra fine fleece cover with backing to protect clothing.*

GoTa-FILM steril / GoTa-FILM Sterile



Anwendungsgebiete:

- ideale Wundabdeckung bei trockenen und schwach sezernierenden Wunden
- als Schutzverband zur Beschleunigung des Heilungsprozesses bei Vernarbung von Wunden wie Verbrennungen I. und II. Grades und Hauttransplantationen
- Inzisionsfolie im chirurgischen Umfeld
- zur Fixierung von Sonden, Kathetern und anderer Wundverbände

Fields of application:

- *ideal wound cover for dry to low exuding wounds*
- *for the treatment of first or second degree burns donor sites, post-operative wounds and minor injuries like abrasions and lacerations*
- *incise drape for surgical interventions*
- *securing of sounds, catheters and other wound dressings*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
4442373	50 mm x 72 mm	1 Stück / dressing
4442516	100 mm x 60 mm	1 Stück / dressing
4442545	150 mm x 100 mm	1 Stück / dressing

Klinikverpackungen / Hospital Packs

4442404	50 mm x 72 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4442539	100 mm x 60 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4442568	150 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
4442396	50 mm x 72 mm	5 Stück/FS / dressings per box
4442522	100 mm x 60 mm	5 Stück/FS / dressings per box
4442551	150 mm x 100 mm	5 Stück/FS / dressings per box

Produkteigenschaften:

- extra dünner selbstklebender Polyurethanfilm
- transparent und elastisch ohne Verformung
- perfekte Anpassung an alle Körperteile sogar Gelenke
- steril und hypoallergen
- gute Haftfähigkeit, ohne die Wunde zu beschädigen
- optimale und dauerhafte Befestigung
- Verminderung der Infektionsgefahr
- Sauerstoff wird durch Wunde und Haut aufgenommen
- Undurchlässigkeit der Flüssigkeiten und Durchlässigkeit der Gase und Wasserdampf
- Zurückbehalten des Wundexsudats
- ständige Sichtkontrolle der Wunde
- wirksamer Schutz und höchste Sicherheit bei der Anwendung

Properties:

- *Extra thin self-adhesive polyurethane film*
- *Transparent and elastic without deformation*
- *Perfect adaptation to all body parts even to joints*
- *Sterile and hypoallergenic*
- *Good adhesion without damaging the wound*
- *Optimal and long-lasting fixation*
- *Reducing the risk of infection*
- *Oxygen is absorbed by the wound and skin*
- *Impermeable to fluids and permeable to gases and water vapour*
- *Retention of wound exudate*
- *Permanent visual control of the wound*
- *Effective protection and high safety during application*

GoTa-silber Wundpflaster steril / GoTa-silber Wound Dressing Sterile



Anwendungsgebiete:

- Als steriler Folgeverband nach chirurgischen Eingriffen oder Unfallverletzungen.

Fields of application:

- *Post-surgery dressing, accident injuries, etc.*

**Lieferformen / How supplied**

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

Klinikverpackungen / Hospital Packs

7023010	50 mm x 72 mm	50 Stück/FS / dressings per box
7023085	100 mm x 60 mm	50 Stück/FS / dressings per box
7022967	50 mm x 72 mm	5 Stück/FS / dressings per box
7023033	100 mm x 60 mm	5 Stück/FS / dressings per box

Produkteigenschaften:

- zentrale Silberauflage
- verklebt nicht mit der Wunde
- sehr gut hautverträglich; luftdurchlässig
- umlaufende Klebefläche, schützt die Wunde von allen Seiten

Properties:

- *central absorbent pad*
- *won't stick to the wound*
- *kind to the skin; air-permeable*
- *continous adhesive border gives all-round wound protection*

ZIP-Strip® Wundpflaster, wasserabweisend / ZIP-Strip® Wound Dressing, Water



Anwendungsgebiete:

- Zur Versorgung von kleinen Verletzungen, die Verschmutzungen in feuchter Umgebung ausgesetzt sind.

Fields of application:

- *Dirt and water repellent woven plaster for small injuries, which are exposed to dirty and moist surroundings.*

Gotha-PAD's Zellstofftupfer / Gotha-PAD's Cotton pads



Anwendungsgebiete:

- Zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen.
- Als Saugpolster bei kleinen Verletzungen.

Fields of application:

- *For hand cleaning before injections and infusions.*
- *As absorptive pad with minor injuries.*

**Lieferformen / How supplied**

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
1021381	72 mm x 25 mm	8 Strips/FS / strips per box

Produkteigenschaften:

- Vielseitig verwendbares Folienpflaster
- Das Trägermaterial ist schmutz- und wasserabweisend.
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- Hygienische Handhabung

Properties:

- Versatile applicable film plaster
- The backing material is dirt and water repellent
- Wound pad does not stick to the wound
- Hygienic handling

Gotha-PAD's Zellstofftupfer / Gotha-PAD's Cotton pads

**Lieferformen / How supplied**

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
8656059	Zellstofftupfer / Cellulose Pads 4 cm x 5 cm	2 x 500 Stück/Beutel / pads per pouch
8709293	Spenderbox / Dispenser Box	1 Box / box

Produkteigenschaften:

- Zellstoff-Tupfer von der Rolle, die gebrauchsfertig vorgestanzt sind.
- Gebleichter Verbandzellstoff

Properties:

- Cotton pads on rolls; prepunched for ease of use.
- Beached surgical cotton.

Sport-, Handwerk-, Haushalts-, Reise-, Gärtnerbox / Sport-, Craftsman's-,



Anwendungsgebiete:

- Verschiedene Spezialpflaster für unterschiedliche Verletzungen im Alltag, in der Freizeit, auf Reisen oder während der Arbeit

Fields of application:

- Several special plasters for different wounds in daily-life, for leisure time, during travelling and work

Kinderpflaster, Colour-Pflaster / Children's Plaster, Colour-Plaster



Anwendungsgebiete:

- Trostpflaster für große und kleine Kinder bei Versorgung alltäglicher Bagatelverletzungen
- Diese Pflaster können bei Verletzungen, die Schmutz oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, angewendet werden.

Fields of application:

- Comforting plasters for little and big children for the treatment of daily-life injuries
- These plasters can be used for wounds, which are exposed to dirt and moisture

**Produkteigenschaften:**

- Das Wundversorgungs-Programm deckt die unterschiedlichen Anwendungsbedürfnisse ab.
- speziell nach Form, Trägermaterial und Haftklebstoff sortierte Wundpflaster


Properties:

- The program of the plasters covers the need of different applications
- Specially assorted wound plasters according to form, carrier material and adhesive

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Art	Inhalt
PZN	Length x Width	Type	Content
Sportbox / Sport Box			
1994327	5 Größen / Sizes		20 Strips/FS / strips per box
	72 mm x 25 mm	Blasenpflaster / Blister Plaster	4 Strips / strips
	75 mm x 45 mm	Fingerkuppenpfl. / Fingertip Plaster	2 Strips / strips
	70 mm x 48 mm	Duschpflaster / Shower Plaster	2 Strips / strips
	60 mm x 60 mm	sensitiv / Sensitive	2 Strips / strips
	72 mm x 20 mm	wasserabweisend / Water Repellent	10 Strips / strips
Handwerkerbox / Craftsman's Box			
7508262	4 Größen / Sizes		7 Strips/FS / strips per box
	50 cm x 6,0 cm	standard / Standard	1 Abschnitt / piece
	12 cm x 2,0 cm	Fingerverband / Finger Plaster	2 Strips / strips
	7,5 cm x 4,5 cm	Fingerkuppenpfl. / Fingertip Plaster	2 Strips / strips
	7,3 cm x 4,3 cm	Gelenkverband / Knuckle Plaster	2 Strips / strips
Haushaltsbox / Household Box			
7508256	5 Größen / Sizes		16 Strips/FS / strips per box
	10 cm x 6,0 cm	standard / Standard	1 Abschnitt / piece
	10 cm x 6,0 cm	wasserabweisend / Water Repellent	1 Abschnitt / piece
	7,2 cm x 1,9 cm	transparent / Transparent	6 Strips / strips
	7,2 cm x 1,9 cm	wasserabweisend / Water Repellent	6 Strips / strips
	6,0 cm x 6,0 cm	sensitiv / Sensitive	2 Strips / strips
Reisebox / Traveller's Box			
7229705	5 Größen / Sizes		30 Strips/FS / strips per box
	7,2 cm x 2,0 cm	standard / Standard	8 Strips / strips
	7,2 cm x 2,0 cm	wasserabweisend / Water Repellent	8 Strips / strips
	7,2 cm x 2,5 cm	wasserabweisend / Water Repellent	4 Strips / strips
	3,8 cm x 1,9 cm	wasserabweisend / Water Repellent	4 Strips / strips
	6,0 cm x 4,0 cm	wasserabweisend / Water Repellent	1 Strip / strip
	7,2 cm x 2,0 cm	transparent / Transparent	4 Strips / strips
	6,0 cm x 6,0 cm	sensitiv / Sensitive	1 Strip / strip
Gärtnerbox / Gardener's Box			
0093131	3 Größen / Sizes		7 Strips/FS / strips per box
	7,2 cm x 2,5 cm	Blasenpflaster / Blister Plaster	2 Strips / strips
	7,5 cm x 4,5 cm	Fingerkuppenpfl. / Fingertip Plaster	4 Strips / strips
	50 cm x 6,0 cm	standard / Standard	1 Abschnitt / piece

Kinderpflaster, Colour-Plaster / Children's Plaster, Colour-Plaster

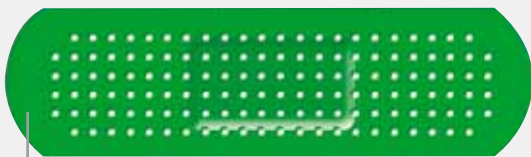**Produkteigenschaften:**

- Hautverträglich und zuverlässig klebend
- Die Wundaufgabe verklebt nicht mit der Wunde.
- Wundaufgaben aus saugfähigem Vlies
- Schmutz- und wasserabweisend
- Besonders hautfreundlich durch Polyacrylat- bzw. Synthese-Kautschuk-Klebmasse

Properties:

- Skin friendly and reliably sticking
- Wound pad does not stick to the wound
- Wound pad of absorbent fleece
- Dirt and water repellent
- Particularly skin friendly through polyacrylate or synthetic caoutchouc adhesive mass

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
Kinderpflaster / Children's Plaster		
0541167	3 Größen / Sizes	12 Stück/FS / strips per box
	2,0 cm x 7,0 cm	6 Strips / strips
	3,8 cm x 7,0 cm	4 Strips / strips
	6,0 cm x 10,0 cm	2 Strips / strips
zum Zuschneiden / for cutting		
1264698	1,0 cm x 6,0 cm	1 Stück/FS / piece per box
Colour-Pflaster / Colour-Plaster		
1405199	wasserabweisend • robust / Water Repellent • Robust	20 Stück/FS / strips per box
rot / red	2,0 cm x 7,0 cm	10 Strips / strips
blau / blue	2,0 cm x 7,0 cm	5 Strips / strips
grün / green	2,0 cm x 7,0 cm	5 Strips / strips

Blasenpflaster (hypoallergen) / Blister Plaster (hypoallergenic)



Anwendungsgebiete:

- Schutz vor Druck und Reibung durch besonders weiche aufgeschäumte Polyethylen-Folie
- Blasenpflaster bieten einen effektiven Schutz bei Hautblasen und wundgescheuerter Haut.

Fields of application:

- Protection against pressure and friction through soft and foamed polyethylene foil
- Blister plasters provide effective protection of blisters and sore skin

GoTac® HydroGel-Pflaster / GoTac® HydroGel-Plaster



Anwendungsgebiete:

- Modernste Versorgung zur Druck- und Schmerzlinderung
- Für Blasen, Schnitt- und Schürfwunden

Fields of application:

- The most modern wound care to relieve pressure and pain
- For blisters, cuts and abrasions



Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
7430471	2 Größen / Sizes	10 Stück/FS / strips per box
	1,9 cm x 7,2 cm	6 Strips / strips
	2,5 cm x 7,2 cm	4 Strips / strips


Produkteigenschaften:

- Blasenpflaster sind besonders hautfreundlich durch Polyacrylat-Klebmasse auf Folie.
- Die saugfähige Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- Wasser- und schmutzabweisend

Properties:

- Skin friendly through polyacrylate adhesive mass on foil
- Absorbent wound pad does not stick to the wound
- Water and dirt repellent

GoTac® HydroGel-Pflaster / GoTac® HydroGel-Plaster

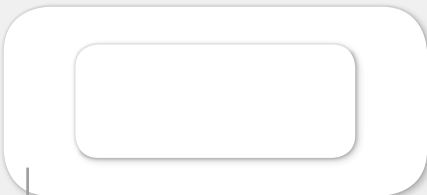

Lieferformen / How supplied			
PZN	Länge x Breite	Art	Inhalt
PZN	Length x Width	Type	Content
2033311	2 Größen / Sizes		8 Stück/FS / strips per box
	74 mm x 45 mm	oval / oval	4 Strips / strips
	56 mm x 25 mm	viereckig / rectangular	4 Strips / strips
2856797	74 mm x 45 mm	oval / oval	6 Strips / strips

Produkteigenschaften:

- Transparent, hauchdünn und superweich
- Schnelle Wundsekretaufnahme; Hilft schnell heilen
- Kühlend durch Gel-Kern
- Sitzt wie eine zweite Haut
- Beste Klebequalität
- Schmerzloser Pflasterwechsel

Properties:

- Transparent, paper-thin and super soft
- Fast exudate absorption; Helps to heal quickly
- Cooling through gel-island
- Fits like a second skin
- Best adhesive quality
- Painless plaster change



Wundpflaster transparent / Wound Plaster Transparent



Anwendungsgebiete:

- Effektiver Schutz vor Wasser und Schmutz

Fields of application:

- *Effective protection from water and dirt*

Wundpflaster soft Vlies (hypoallergen) / Wound Plaster Soft Fleece (hypoallergenic)



Anwendungsgebiete:

- Zur Abdeckung von oberflächlichen kleinsten Wunden, kleinen Schnittverletzungen
- Zur Abdeckung nach Injektionen

Fields of application:

- *Cover of smallest superficial wounds and small cuts*
- *Cover after injections*



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
<i>PZN</i>	<i>Length x Width</i>	<i>Content</i>
0412487	ø 2,5 cm	20 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- Transparent, flexibel, atmungsaktiv, anschmiegsam
- Besonders hautfreundlich durch Polyacrylat-Klebmasse
- Die Wundauflage besteht aus einem saugfähigen Vlies.

Properties:

- *Transparent, flexible, breathable, conformable*
- *Skin friendly through polyacrylate adhesive mass on PU foil*
- *The wound pad consists of an absorbent fleece*



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
<i>PZN</i>	<i>Length x Width</i>	<i>Content</i>
1456280	ø 2,5 cm	20 Stück/FS / pieces per box


Produkteigenschaften:

- Hypoallergenes Wundpflaster mit besonders anschmiegsamem, hautfarbenen Vlies
- Zentrale Wundauflage, rundum klebend
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Luftdurchlässig
- Hautfreundlich und zuverlässig klebend

Properties:

- *Hypoallergenic wound plaster with highly conformable skin coloured fleece*
- *Central wound pad, all-round sticking*
- *Does not stick to the wound*
- *Air-permeable*
- *Skin friendly and reliably sticking*

Gotha-FIX® stretch / Gotha-FIX® Stretch

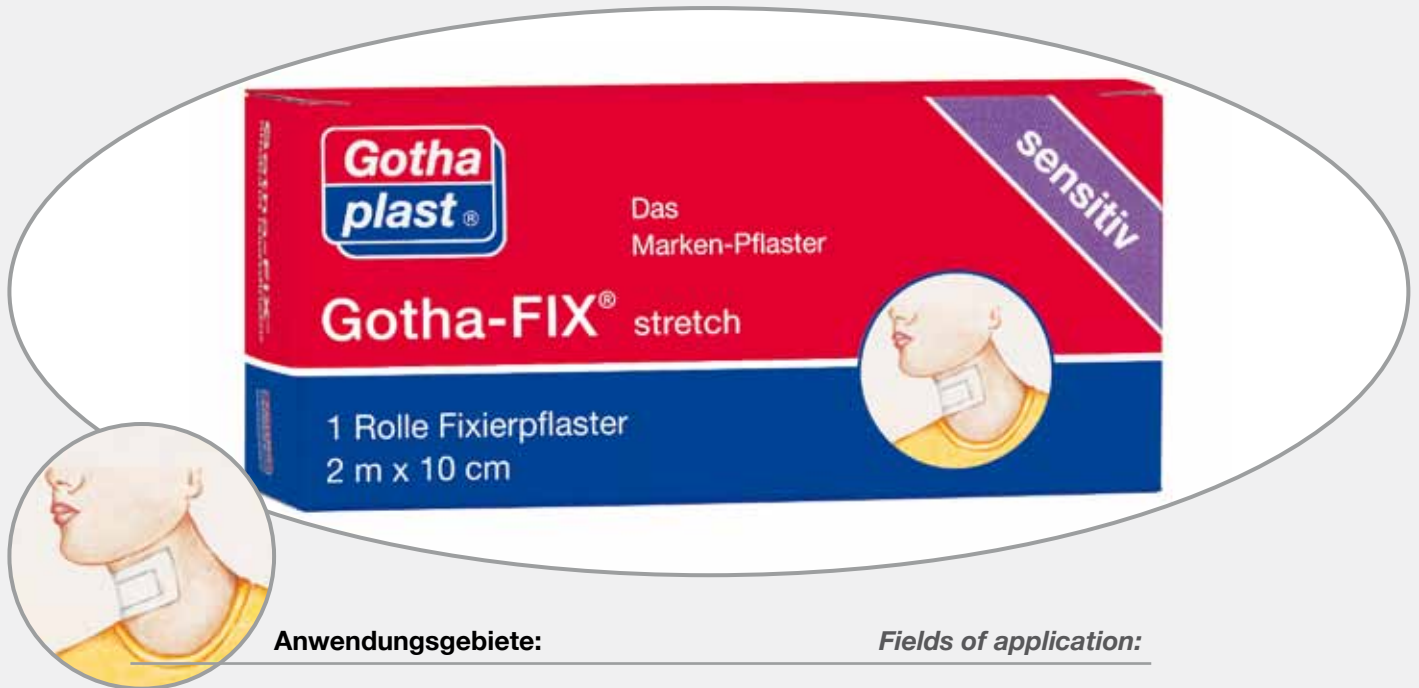

Anwendungsgebiete:

- Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, besonders an bewegten Körperpartien und Gelenken
- Zur Befestigung von großflächigen Verbänden, Kathetern

Fields of application:

- Full area retention of dressings, especially on moving body parts and joints
- Retention of large area dressings, catheters

Duschpflaster XL / Shower Plaster XL



Anwendungsgebiete:

- Effektiver Schutz vor Wasser und Schmutz

Fields of application:

- Effective protection from water and dirt



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
-----	----------------------------------	-------------------

Spenderschachtel / Dispenser Box

6887205	10 m x 5 cm	1 Rolle/FS / roll per box
6887211	10 m x 10 cm	1 Rolle/FS / roll per box
6887228	10 m x 15 cm	1 Rolle/FS / roll per box
6887234	10 m x 20 cm	1 Rolle/FS / roll per box
1873983	2 m x 10 cm	1 Rolle/FS / roll per box
1874008	2 m x 15 cm	1 Rolle/FS / roll per box


Produkteigenschaften:

- Das sanfte Vliespflaster mit einem hypoallergenen Polyacrylat-Klebstoff bei empfindlicher Haut
- Anschmiegsam durch querelastisches, besonders weiches Polyester-Vlies
- Paßt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an; faltenfrei anlegbar
- Luftdurchlässig

Properties:

- *Soft fleece tape with hypoallergenic polyacrylate adhesive for sensitive skin*
- *Conformable through transversely elastic, especially soft polyester fleece*
- *Conforms well over strongly contoured body parts; application without folds*
- *Air-permeable*

Duschpflaster XL / Shower Plaster XL

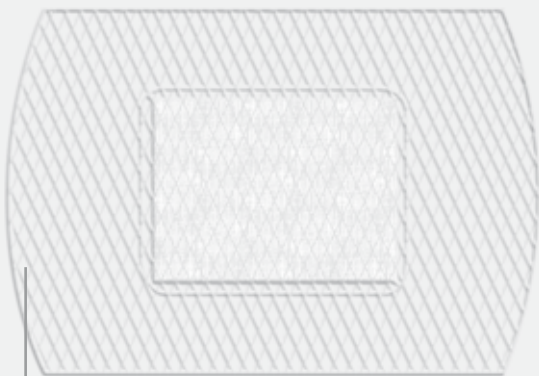

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
-----	----------------------------------	-------------------

1605403	70 mm x 48 mm	10 Stück/FS / pieces per box
---------	---------------	------------------------------

Produkteigenschaften:

- Transparent, flexibel, atmungsaktiv, anschmiegsam
- Besonders hautfreundlich durch Polyacrylat-Klebmasse auf PU-Folie
- Die Wundauflage besteht aus einem saugfähigen Vlies.

Properties:

- *Transparent, flexible, breathable, conformable*
- *Skin friendly through polyacrylate adhesive mass on PU foil*
- *The wound pad consists of an absorbent fleece*

Fingerkuppenpflaster, Fingerpflaster / Fingertip Plaster, Finger Plaster



Anwendungsgebiete:

- **Fingerpflaster** sind durch die extra lange Form besonders bei Verletzungen an vielbewegten Fingergelenken geeignet
- **Fingerkuppenpflaster** bieten durch besondere Flügelform einen effektiven Schutz bei Verletzungen an Fingern, Finger- und Zehenkuppen

Fields of application:

- **Finger plasters** with extra long form are especially suited for wounds on much moved-finger joints
- **Fingertip plasters** offer effective protection of wounds on fingers, fingertips and toetips-through the special wing form

Saniflex® Fingerlinge / Saniflex® Finger Cots




Anwendungsgebiete:

- Schützt den Finger vor vielen aggressiven Agenzien und hautschädigenden Einwirkungen
- Der optimale Fingerschutz für die Wundversorgung
- Fingerling kurz in der Hand erwärmen, dann überziehen

Fields of application:

- Protects finger against a lot of aggressive-agents and skin damaging effects
- The optimal finger protection during wound treatment
- Briefly warm up the finger cot in the hand, then put it on

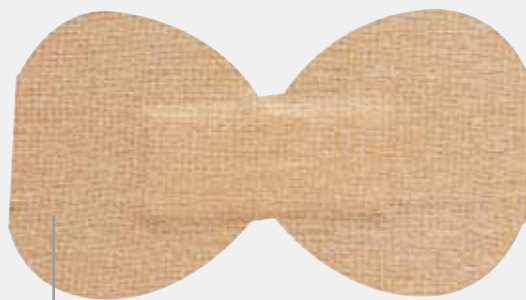

Produkteigenschaften:

- Luftdurchlässig
- Hautverträglich und zuverlässig klebend
- Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
- Durch Spezialformen leicht anlegbare Pflaster
- Elastisches, anschmiegsames Textilpflaster bietet Wundschutz von allen Seiten

Properties:

- *Air-permeable*
- *Skin friendly and reliably sticking*
- *Wound pad does not stick to the wound*
- *Special forms for easy placement of plaster*
- *Elastic, conformable textile plaster allows for wound protection from all sides*

Lieferformen / *How supplied*

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

Fingerkuppenpflaster / *Fingertip Plaster*

7669918	2 Größen / <i>Sizes</i>	10 Stück/FS / <i>pieces per box</i>
	4,0 cm x 6,0 cm	6 Stück / <i>pieces</i>
	4,5 cm x 7,5 cm	4 Stück / <i>pieces</i>

Fingerpflaster / *Finger Plaster*

4409944	2,0 cm x 12 cm	10 Stück/FS / <i>pieces per box</i>
---------	----------------	-------------------------------------

Fingerkuppenpflaster mit Fingerling / *Fingertip Plaster with Finger Cots*

1128452	2 Größen / <i>Sizes</i>	10 Stück/FS / <i>pieces per box</i>
	4,0 cm x 6,0 cm	6 Stück / <i>pieces</i>
	4,5 cm x 7,5 cm	4 Stück / <i>pieces</i>
	Fingerling / <i>Finger Cots</i>	2 Stück / <i>pieces</i>



Produkteigenschaften:

- Beeinträchtigt auch bei ständigem Gebrauch die Blutzirkulation in keinsten Weise
- Bestehen aus thermoplastischen Kunstharz
- Latexfrei
- Physiologisch unbedenklich
- Wasserdicht
- Erhalten ein hohes Fingerspitzengefühl
- Schützt vor Schmutz und Nässe

Properties:

- *Dog not impage blood-circulation in case of regular use*
- *Consist of thermoplastic resin*
- *Larex-free*
- *Physiologically safe*
- *Waterproof*
- *Provide high fingertip sensitivit*
- *Protect against dirt and moisture*

Lieferformen / *How supplied*

PZN	Größe	Inhalt
PZN	Size	Content

2023123	Universalgröße / <i>Universal Size</i>	6 Stück/FS / <i>pieces per box</i>
---------	--	------------------------------------

Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe Latex / Rotpunkt® Examination Gloves



Fields of application according to DIN EN 455 T 1-3:

Examination gloves must be worn during the following activities:

- Wound care, dressing changes
- Small surgical interventions
- Aseptic operation preparation
- During rectal or gynecological interventions
- Placing of catheters, drawing blood
- Preparation of medicaments
- Working with disinfectants and detergents

Anwendungsgebiete lt. DIN EN 455 T 1-3:

Untersuchungshandschuhe müssen z.B. bei folgenden Tätigkeiten getragen werden:

- Wundversorgung, Verbandwechsel
- Kleine chirurgische Eingriffe
- Aseptische OP-Vorbereitung
- Bei rektalen oder gynäkologischen Eingriffen
- Legen von Kathetern, Blutabnahme
- Beim Ansetzen von Medikamenten
- Bei der Arbeit mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln

Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe Nitril / Rotpunkt® Examination Gloves



Fields of application according to DIN EN 455 T 1-3:

Examination gloves must be worn during the following activities:

- Nitrile is synthetically produced latex and free from allergenic proteins and is therefore suited for persons with diagnosed latex allergy

Anwendungsgebiete lt. DIN EN 455 T 1-3:

Untersuchungshandschuhe müssen z.B. bei folgenden Tätigkeiten getragen werden:

- insbesondere für Träger, aber auch Patienten mit Latex-Allergien



Lieferformen / How supplied

PZN	Größe		Inhalt
PZN	Size		Content

Klinikverpackungen / Hospital Box

1670754	XS	sehr klein / extra small	5 - 5½	100 Stück/Box / gloves per box
1415387	S	klein / small	6 - 6½	100 Stück/Box / gloves per box
1426103	M	mittel / medium	7 - 7½	100 Stück/Box / gloves per box
1426126	L	groß / large	8 - 8½	100 Stück/Box / gloves per box
1670760	XL	sehr groß / extra large	9 - 9½	100 Stück/Box / gloves per box

Produkteigenschaften:

- Polymerbeschichteter dünner Latex
- Puderfrei
- Unsteril
- Proteinarm
- Hohe Griffsicherheit
- Exzellente Passform
- Hohe Reißfestigkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Bestmögliche Hautverträglichkeit
- Leicht anzuziehen
- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand

Properties:

- Polymer coated thin latex
- Powder free
- Non sterile
- Low protein content
- High gripping power
- Excellent fit
- High resistance to tearing
- Very good sense of touch
- Optimum compatibility with skin
- Easy to put on
- Ambidextrous
- Rolled edges



Lieferformen / How supplied

PZN	Größe		Inhalt
PZN	Size		Content

Klinikverpackungen / Hospital Box

6892330	XS	sehr klein / extra small	5 - 5½	100 Stück/Box / gloves per box
6892347	S	klein / small	6 - 6½	100 Stück/Box / gloves per box
6892436	M	mittel / medium	7 - 7½	100 Stück/Box / gloves per box
6892471	L	groß / large	8 - 8½	100 Stück/Box / gloves per box
6892531	XL	sehr groß / extra large	9 - 9½	100 Stück/Box / gloves per box

Produkteigenschaften:

- Puderfrei
- Unsteril
- Hohe Griffsicherheit
- Exzellente Passform
- Hohe Reißfestigkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Beidhändig tragbar

Properties:

- Powder free
- Non sterile
- High gripping power
- Excellent fit
- High resistance to tearing
- Very good sense of touch
- Ambidextrous

Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe Vinyl / Rotpunkt® Examination Gloves



Fields of application according to DIN EN 455 T 1-3:

Examination gloves must be worn during the following activities:

- Wound care, dressing changes
- Small surgical interventions
- Aseptic operation preparation
- During rectal or gynecological interventions
- Placing of catheters, drawing blood
- Preparation of medicaments
- Working with disinfectants and detergents

Anwendungsgebiete lt. DIN EN 455 T 1-3:

Untersuchungshandschuhe müssen z.B. bei folgenden Tätigkeiten getragen werden:

- Wundversorgung, Verbandwechsel
- Kleine chirurgische Eingriffe
- Aseptische OP-Vorbereitung
- Bei rektalen oder gynäkologischen Eingriffen
- Legen von Kathetern, Blutabnahme
- Beim Ansetzen von Medikamenten
- Bei der Arbeit mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln

Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe Vinyl soft / Rotpunkt® Examination



Fields of application according to DIN EN 455 T 1-3:

Examination gloves must be worn during the following activities:

- Wound care, dressing changes
- Small surgical interventions
- Aseptic operation preparation
- During rectal or gynecological interventions
- Placing of catheters, drawing blood
- Preparation of medicaments
- Working with disinfectants and detergents

Anwendungsgebiete lt. DIN EN 455 T 1-3:

Untersuchungshandschuhe müssen z.B. bei folgenden Tätigkeiten getragen werden:

- Wundversorgung, Verbandwechsel
- Kleine chirurgische Eingriffe
- Aseptische OP-Vorbereitung
- Bei rektalen oder gynäkologischen Eingriffen
- Legen von Kathetern, Blutabnahme
- Beim Ansetzen von Medikamenten
- Bei der Arbeit mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln

**Lieferformen / How supplied**

PZN PZN	Größe Size	Inhalt Content
1415370	S klein / small	6-6½ 100 Stück/Box / gloves per box
1426089	M mittel / medium	7-7½ 100 Stück/Box / gloves per box
1426095	L groß / large	8-8½ 100 Stück/Box / gloves per box

Produkteigenschaften:

- Vinyl
- Leicht gepudert
- Unsteril
- Frei von allergenen Proteinen
- Hohe Griffsicherheit
- Exzellente Passform
- Hohe Reißfestigkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Leicht anzuziehen
- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand

Properties:

- Vinyl
- Slightly powdered
- Non sterile
- Free of allergenic proteins
- High gripping power
- Excellent fit
- High resistance to tearing
- Very good sense of touch
- Easy to put on
- Ambidextrous
- Rolled edges

Gloves Vinyl Soft**Handschuhe Vinyl soft / Gloves Vinyl Soft****Lieferformen / How supplied**

PZN PZN	Größe Size	Inhalt Content
1026881	S klein / small	6-6½ 100 Stück/Box / gloves per box
1026898	M mittel / medium	7-7½ 100 Stück/Box / gloves per box
1026906	L groß / large	8-8½ 100 Stück/Box / gloves per box


Produkteigenschaften:

- Vinyl
- Puderfrei
- Unsteril
- Frei von allergenen Proteinen
- Hohe Griffsicherheit
- Exzellente Passform
- Hohe Reißfestigkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Leicht anzuziehen
- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand

Properties:

- Vinyl
- Powder free
- Non sterile
- Free of allergenic proteins
- High gripping power
- Excellent fit
- High resistance to tearing
- Very good sense of touch
- Easy to put on
- Ambidextrous
- Rolled edges

Capsi-med® Wärmepflaster / Capsi-med® Heat Plaster

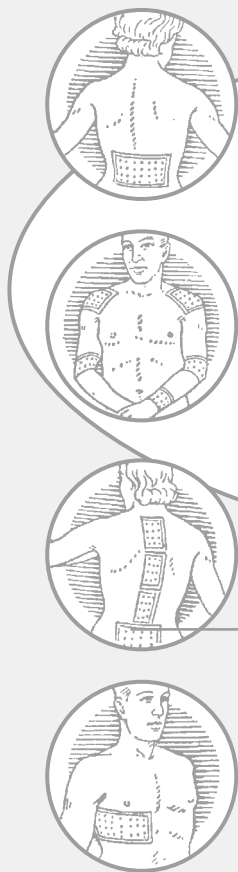

Anwendungsgebiete:

- Nonivamid, ein Wirkstoff des Cayenpeffers, wird angewendet zur lokalen Wärmebehandlung bei rheumatischen Muskel- und Gelenksbeschwerden wie z.B. Ischias, Hexenschuß und Nackensteifigkeit sowie bei schmerzhaften Muskelverspannungen im Schulter-Arm-Bereich sowie im Bereich der Wirbelsäule.

Fields of application:

- *Nonivamide, one of the active ingredients of Cayenne pepper, is applied for the local treatment of rheumatic muscle and joint conditions, e.g. sciatica, lumbago and stiff neck as well as painful muscle sprains affecting the shoulder-arm area and the vertebra.*

Hühneraugenpflaster, Hornhautpflaster / Corn Remover, Callus Remover



Anwendungsgebiete:

- Zur Auflösung der Hornsubstanz
- Bei Schwielen und Hornhautverdickungen sowie Hühneraugen

Fields of application:

- *For dissolving the callous substance*
- *For calluses and corns*



Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
5867873	11 cm x 18 cm	1 Stück / piece

Produkteigenschaften:

- Wirkt direkt an der betreffenden Schmerzstelle
- Gleichbleibender Wirkstoffgehalt durch wohldefinierte aktive Substanz
- Spendet wohltuende Wärme durch Aktivierung der Körperwärme
- Sehr selten auftretende Nebenwirkungen
- Läßt sich individuell zuschneiden

Properties:

- *Directly acts at the site of pain*
- *Constant content of active ingredient due to well defined substance*
- *Provides comforting warmth through activation of body warmth*
- *Very rarely occuring side effects*
- *Can be cut to individual size*

Hühneraugenpflaster, Hornhautpflaster / Corn Remover, Callus Remover



Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content

Hühneraugenpflaster / Corn Remover		
6339722	2 cm x 6 cm	5 Stück/FS / strips per box

Hornhautpflaster / Callus Remover		
4079174	10 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box

Produkteigenschaften:

- Die Wirkstoffklebemasse enthält 40% Salicylsäure.
- Trägermaterial aus hautfarbenem, starren Textilgewebe
- Zuverlässig klebend, problemlos ablösbar
- Hornhautpflaster läßt sich individuell zuschneiden.
- Hühneraugenpflaster in applikationsgerechtem Zuschnitt

Properties:

- *The adhesive mass contains 40% salicylic acid*
- *Backing material is a skin coloured, rigid woven fabric*
- *Reliably sticking and easily removable*
- *Callus remover can be individually cut to size*
- *Corn remover in application adapted size*

Heftpflaster standard / Adhesive Tape Standard



Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares Textilpflaster zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe und für Streckverbände

Fields of application:

- Versatile applicable textile tape for the retention of dressings of every type and size and extension bandages

Heftpflaster Vlies / Adhesive Tape Fleece



Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares, besonders hautfreundliches Fixierpflaster
- Zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe sowie von Elektroden und sonstigen-Meßelementen

Fields of application:

- Versatile applicable, especially skin friendly retention tape
- Retention of dressings of every type and size, electrodes and other measuring devices



Produkteigenschaften:

- Hautfarbenes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Naturkautschuk-Klebmasse
- Hohe Widerstandsfähigkeit; außergewöhnlich zugfest
- Haftet auch bei starker Belastung fest und sicher
- Hohe Sofort- und Dauerklebkraft
- Wasserabweisende Oberfläche
- Hautverträglich
- Luftdurchlässig

Properties:

- *Skin-coloured retention tape with zinc oxide natural caoutchouc adhesive*
- *High resistance; extraordinary tensile strength*
- *Adheres strongly and securely even under heavy strain*
- *High instant and permanent adhesiveness*
- *Water repellent surface*
- *Skin friendly*
- *Air-permeable*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
4051336	5 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
4051342	5 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
4051359	5 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box
4092045	5 m x 1,25 cm	1 Rolle/FS / roll per box
4092051	5 m x 2,5 cm	1 Rolle/FS / roll per box



Produkteigenschaften:

- Weißes Vliesgewebe mit hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- Für extrem empfindliche Haut
- Sehr gut luftdurchlässig
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft
- Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- Leicht von Hand reißbar
- Besonders hautfreundlich und zuverlässig klebend

Properties:

- *White non-woven fabric with hypoallergenic polyacrylate adhesive*
- *For particularly sensitive skin*
- *Highly air-permeable*
- *Good instant and permanent adhesiveness*
- *Painless removal without leaving residues*
- *Easily torn by hand*
- *Skin friendly and reliably sticking*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
4079151	10 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
4051371	10 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
4051365	10 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box
4092068	10 m x 1,25 cm	1 Rolle/FS / roll per box
4092074	10 m x 2,5 cm	1 Rolle/FS / roll per box

Klinikverpackungen (ohne Seitenscheiben und Schutzring) / Hospital Box (without side guards and cover)

7105417	10 m x 1,25 cm	24 Rollen/FS / rolls per box
7105423	10 m x 2,5 cm	12 Rollen/FS / rolls per box
7105446	10 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box

Gotha-SILK Heftpflaster Seide / Gotha-SILK Adhesive Tape Silk



Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares, besonders hautfreundliches Fixierpflaster
- Zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe
- Problemlose Befestigung und Sicherung von Kathetern, Sonden und Kanülen

Fields of application:

- Versatile applicable, especially skin friendly retention tape
- Retention of dressings of every type and size
- Securement of catheters, probes and cannulae without problems

Gotha-FLEX Heftpflaster transparent / Gotha-FLEX Adhesive Tape Transparent



Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares, besonders hautfreundliches Fixierpflaster
- Zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe sowie von Kanülen, Sonden und Kathetern

Fields of application:

- Versatile applicable, especially skin friendly retention tape
- Retention of dressings of every type and size as well as cannulae, probes and catheters



Produkteigenschaften:

- Weißes Seidengewebe mit Zick-Zack-Rand und hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- Für empfindliche Haut; Sehr gut luftdurchlässig
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft; Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- Leicht und akkurat von Hand reißbar; Gut beschriftbar
- Hautfreundlich und zuverlässig klebend
- Neutral gegenüber Kunststoff und Gummi

Properties:


- *White silk fabric with zigzag border and hypoallergenic polyacrylate adhesive*
- *For sensitive skin; Highly air-permeable*
- *Good instant and permanent adhesiveness; Painless removal without leaving residues*
- *Easily torn by hand; Easy to write on*
- *Particularly skin friendly and reliably sticking*
- *Inert to plastics and rubber*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
6996532	5 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
6996549	5 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
6996555	5 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box

Klinikverpackungen (ohne Seitenscheiben und Schutzring) / Hospital Box (without side guards and cover)

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
7105340	10 m x 1,25 cm	24 Rollen/FS / rolls per box
7105357	10 m x 2,5 cm	12 Rollen/FS / rolls per box
7105363	10 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box

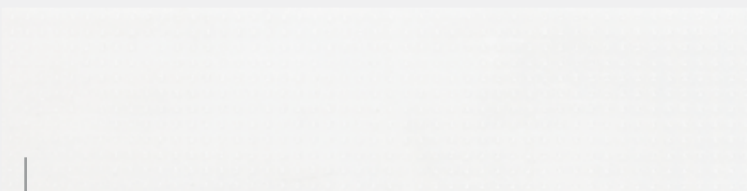

Produkteigenschaften:

- Transparente, microperforierte PE-Folie mit hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- Für besonders empfindliche Haut
- Sehr gut luftdurchlässig
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft; Schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- Leicht von Hand reißbar
- Hautfreundlich und zuverlässig klebend
- Wasserabweisend

Properties:

- *Transparent, microperforated PE film with hypoallergenic polyacrylate adhesive*
- *For extremely sensitive skin*
- *Highly air-permeable*
- *Good instant and permanent adhesiveness; Painless removal without leaving residues*
- *Easily torn by hand*
- *Particular skin friendly and reliably sticking*
- *Water repellent*

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
6996590	10 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
6996609	10 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
6996615	10 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box



Angaben zu Displaygrößen: / Display Dimensions:

	Breite / Width	Höhe / High	Tiefe / Depth
• Display A	30 cm	x 10 cm	x 20 cm
• Display C	16 cm	x 21 cm	x 10 cm
• Display D	9 cm	x 60 cm	x 17 cm
• Display E	10 cm	x 40 cm	x 20 cm
• Display F	40 cm	x 210 cm	x 35 cm
• Display H	15 cm	x 11 cm	x 26 cm
• Display I	10 cm	x 40 cm	x 20 cm
• Display K	21 cm	x 5 cm	x 35 cm



Gothaplast® Academy

Die Gothaplast® Akademie begann Aktivitäten im Jahre 2001. Seitdem werden wissenschaftliche Seminare zu wechselnden Fachthemen, die große Akzeptanz finden, durchgeführt.

Das Betätigungsfeld der Akademie ist die Fortbildung medizinischen Fachpersonals in Kooperation mit den staatlichen Institutionen, wie den Landesärztekammern, die diese Vorträge in ihr Punktesystem einbeziehen und die Teilnahme innerhalb der freiwilligen Fortbildung zertifizieren.

In die Aktivitäten der Gothaplast® Akademie sind Wissenschaftler der Fachrichtungen Medizin, Chemie und Biologie eingebunden. Inhalt der Seminare der modernen Wundversorgung ist die effektive Behandlung von chronischen Wundheilungsstörungen unter ökonomischen Aspekten.

Auch außerhalb Deutschlands ist die Gothaplast® Akademie aktiv.

Gothaplast® Academy

Gothaplast® Academy started its activities in 2001. Since then scientific seminars on changing topics are held which are very well accepted.

The field of activities of the Gothaplast® Academy focuses on the education of medical personnel in cooperation with governmental institutions like the federal medical societies which include the lectures in their point system and certify the participation within the scope of the voluntary education.

Scientists from various branches like medicine, chemistry, biology are incorporated in the Academy's activities. The subject of the seminars on modern wound management is the effective treatment of chronic wound healing disturbances and its impact on economical aspects.

Outside Germany the Gothaplast® Academy is also active.



Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH
Hans-C.-Wirz-Straße 2
99867 Gotha / Germany

Telefon: +049 (0) 36 21 / 30 65-0
Telefax: +049 (0) 36 21 / 30 65-30

gebührenfreie / toll-free Hotline:
Telefon: 08 00 / 5 05 35 11
Telefax: 08 00 / 5 05 25 11

E-mail: info@gothaplast.de
Internet: www.gothaplast.de