



Kompendium



Gothaplast® — ein GROSSES kleines UNTERNEHMEN

herausfordernd im Wettbewerb durch Qualität und Innovation. Gothaplast® ist vor allem etwas sehr persönliches: ein engagiertes Team von Männern und Frauen mit Werten und internationalem Horizont, traditionell fokussiert auf **Wundversorgung und transdermale Systeme.**

Gothaplast® — a GREAT little COMPANY

challenging with quality and imagination. Gothaplast® is above all something very personal: a team of men and women with values and international horizon focusing on unique quality of
wound-care and transdermal systems.

Gothaplast® wurde im Mai 1944 in der Residenzstadt Gotha von dem Schweizer Pharmazeuten Hans C. Wirz, Schwiegersohn von Carl Blank, als weitere Produktionsstätte der Carl Blank KG Verbandpflasterfabrik, Bonn/Rhein, gegründet.

Gothaplast® was founded in May 1944 by the Swiss entrepreneur Hans C. Wirz, son-in-law of Carl Blank, as a production plant of Carl Blank KG Verbandpflasterfabrik, Bonn/Rhein.



Gothaplast-Betriebsstätte, Hans-C.-Wirz-Straße 2, D-99867 Gotha



Gothaplast Postfach 10 01 32, 99851 Gotha

Telefon: 0 36 21 30 65 0, Fax: 0 36 21 30 65 30

E-mail: info@gothaplast.de, Internet: www.gothaplast.de

Wundpflaster / Wound Plasters

• OsMo®-plus Wundauflage / OsMo®-plus Wound Dressing	4 / 5
• OsMo® Sil-plus Silikonpflaster/ -auflage / Silicone Wound Plaster/ -Dressing	4 / 5
• Wundpflaster standard/Textil / Wound Plaster Standard/Textile	6 / 7
• Wundpflaster elastisch/Textil / Wound Plaster Elastic/Textile	6 / 7
• Wundpflaster Comfort und sensitiv / Wound Plaster Comfort and Sensitive	8 / 9
• Wundpflaster wasserabweisend • robust / Wound Plaster Water Repellent • Robust	8 / 9
• GoTa-POR® steril / GoTa-POR® Sterile	10 / 11
• GoTa-POR PU-Wundfilm steril / GoTa-POR® PU-Woundfilm Sterile	10 / 11
• GoTa-POR® Kanülenpflaster steril / GoTa-POR® IV (Intravenous) Attachment Sterile	12 / 13
• GoTa-DERM® thin steril, foam steril / GoTa-DERM® Thin Sterile, Foam Sterile	14 / 15
• GoTac® HydroGel-Pflaster, steril / GoTac® Hydrogel-Dressing, Sterile	16 / 17
• OsMo-med, steril / OsMo-med, Sterile	18 / 19
• GoTa-sorb, steril / GoTa-sorb, Sterile	18 / 19
• GoTa-FILM steril / GoTa-FILM Sterile	20 / 21

Spezialpflaster / Special Plasters

• GoTa-haft® kohäsive Fixierbinde latexfrei / GoTa-haft® cohesive fixation band	22 / 23
• ZIP-Strip® Wundpflaster, wasserabweisend / ZIP-Strip® Wound Dressing, Water Repellent	24 / 25
• Gotha-PAD's Zellstoff-Tupfer / Gotha-PAD's Cotton pads	24 / 25
• Mischboxen / Mixed boxes	26 / 27
• Kinderpflaster, Tattoo/ Children's Tattoo, Plaster	26 / 27
• Blasenpflaster / Blister Plaster	28 / 29
• GoTac® HydroGel-Pflaster / GoTac® Hydrogel-Plaster	28 / 29
• Wundpflaster transparent / Wound Plaster Transparent	30 / 31
• Wundpflaster soft Vlies / Wound Plaster Soft Fleece	30 / 31
• Gotha-FIX® stretch / Gotha-FIX® Stretch	32 / 33
• Dusch-Pflaster XL / Shower Plaster XL	32 / 33
• Fingerkuppenpflaster mit Fingerling / Fingertip Plaster with Finger cots	34 / 35
• Fingerverbände / Finger Plaster	34 / 35

Hygiene / Hygiene

• Saniflex® Fingerlinge / Saniflex® Finger Cots	34 / 35
• Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe / Rotpunkt® Examination Gloves	36 / 37
Latex, Nitril / Latex, Nitril	36 / 37
Vinyl soft / Vinyl Soft	38 / 39

Medizinische Pflaster / Medical Plasters

• Capsi-med® Wärmepflaster / Capsi-med® Heat Plaster	40 / 41
• Hühneraugenpflaster, Hornhautpflaster / Corn Remover, Callus Remover	40 / 41

Heftpflaster / Adhesive Tapes

• Heftpflaster standard / Adhesive Tape Standard	42 / 43
• Heftpflaster Vlies / Adhesive Tape Fleece	42 / 43
• Gotha-SILK Heftpflaster Seide / Gotha-SILK Adhesive Tape Silk	44 / 45
• Gotha-FLEX Heftpflaster transparent / Gotha-FLEX Adhesive Tape Transparent	44 / 45

Moderne Wundversorgung / Advanced Wound Care

• OsMo®-plus Wundauflage / OsMo®-plus Wound Dressing	4 / 5
• OsMo® Sil-plus Silikonpflaster/ -auflage / Silicone Wound Plaster/ -Dressing	4 / 5
• GoTa-DERM® thin steril, foam steril / GoTa-DERM® Thin Sterile, Foam Sterile	14 / 15
• GoTac® HydroGel-Pflaster, steril / GoTac® Hydrogel-Dressing, Sterile	16 / 17
• OsMo-med, steril / OsMo-med, Sterile	18 / 19

• Gothaplast® Verkaufspräsentationen / Gothaplast® Sales Presentations	46
• Gothaplast® Akademie / Gothaplast® Academy	47

OsMo®-plus Wundauflage / OsMo®-plus Wound Dressing



Anwendungsgebiete:

- OsMo®-plus ist für die Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, Druckgeschwüren, OP-Wunden und bei Verbrennungen 2. Grades geeignet.

Fields of application:

- OsMo®-plus is suitable for the treatment of moderately to strongly exuding wounds, pressure ulcers, surgical wounds and second-degree burns.

OsMo® Sil-plus Silikonpflaster/ -auflage / Silicone Wound Plaster/ -Dressing



Anwendungsgebiete:

- OsMo® Sil-plus ist für eine breite Palette von exsudierenden Wunden geeignet, einschließlich traumatische Wunden z.B. Beingeschwüre, diabetisches Fußsyndrom und Druckgeschwüre. Zur Behandlung von schwach bis stark exsudierenden Wunden geeignet.

Fields of application:

- OsMo® Sil-plus is suitable for a wide range of exuding wounds including traumatic wounds e.g. diabetic foot syndrome and pressure swallowing. suitable for the treatment of weak to very exuding wounds

Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

Wundauflage / Wound Dressing		
10193112	12 cm x 10 cm	10 Stück/FS / piece per box

Produkteigenschaften:

- gute Flüssigkeitsaufnahme durch die kapillare Struktur des Polymerschaums
- speichern des Wundexsudates in der Gel-Membran.
- In der Gel-Membran wird die Absorbtionsfähigkeit des Polymerschaumes auch unter Kompression (Druck) gewährleistet.

Properties:

- *good fluid intake through the capillary structure of the polymer foam*
- *storing the wound exudate in the gel membrane*
- *in the gel membrane the absorbability of the polymer foam also under compression (pressure) guaranteed*

OsMo® Sil-plus Silikonpflaster/ -auflage / Silicone Wound Plaster/ -Dressing

Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

OsMo® Sil-plus / Silicone Plaster		
11896962	8 cm x 8 cm	10 Stück/FS / piece per box
11896933	10 cm x 10 cm	10 Stück/FS / piece per box

OsMo® Sil-plus Silikon-Schaumauflage / Silicone Foam Layer		
11896985	11 cm x 11 cm	10 Stück/FS / piece per box

Produkteigenschaften:

- Zuverlässiger Halt und sanft zu lösen durch schonende, gleichmäßige Haftung mit Silikon Technologie, klebt sicher, auch bei mehrmaliger Korrektur der Pflasterposition.
- hervorragendes Exsudatmanagement leistungsstark in der Exsudataufnahme, kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde bleiben.
- Schutz vor äußeren Einflüssen, keimdichte, atmungsaktive Polyurethanfolie, Silikonpflaster kann zum Duschen verwendet werden (wasserdicht).
- atraumatischer, schmerzloser Verbandwechsel, geeignet für empfindliche Haut, für stark behaarte Haut, für Kinder und ältere Menschen, feinporiger Polyurethanschaum verhindert Einsprossung von Granulationsgewebe.

Properties:

- *reliable hold and gentle release by gentle, even adhesion with silicone technology sticks securely, even if the paving position is corrected several times.*
- *outstanding exudate management powerful in the exudate recording, can take up to 7 days to remain on the wound.*
- *protection against external influences: germproof, breathable polyurethane film, silicone plaster can be used for showers (waterproof).*
- *atraumatic, painless dressing change, suitable for sensitive skin, for highly hairy skin, for children and the elderly fine pore polyurethane foam prevents sprouting granulation tissue.*

Wundpflaster standard/Textil / Wound Plaster Standard/Textile



Anwendungsgebiete:

- starres Textilpflaster für die schnelle und einfache hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
- zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riss- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- rigid woven plaster for the rapid and simple hygienic treatment of daily-life injuries
- cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts

Wundpflaster elastisch/Textil / Wound Plaster Elastic/Textile



Anwendungsgebiete:

- Textilpflaster für Verletzungen im Alltag an konturierten, beweglichen Körperstellen und Gelenken
- zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riss- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- elastic woven plaster for daily-life injuries on mobile parts of the body and joints
- cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts

standard/Textil / Standard/Textile

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm

04951270	1 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951287	50 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951293	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951318	1 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

zum Zuschneiden / for individual cutting

07393089	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
----------	------------	----------------------------

Rolle in Spenderschachtel / Dispenser Box

04951324	5 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951330	5 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951347	5 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

Produkteigenschaften:

- vielseitig verwendbares Textilpflaster mit Zinkoxid Naturkautschuk-Klebmasse bzw. Synthesekautschuk
- Das Viskosegewebe und die für Gothaplast typische Perforation lassen Luft ungehindert durchdringen.
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.

Properties:

- versatile applicable textile plaster with zinc oxide natural caoutchouc adhesive or synthetic caoutchou • Viscose woven and the typical Gothaplast perforation allows for air-permeability
- wound pad does not stick to the wound

elastisch/Textil / Elastic/Textile

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm

04951376	1 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951382	50 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951399	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951413	1 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

Rolle in Spenderschachtel / Dispenser Box

04951436	5 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951442	5 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951459	5 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box

Injektionspflaster / Injection Plaster

04079122	1,25 cm x 4 cm	350 Abschn./FS / strips per box
04079139	2,00 cm x 6 cm	220 Abschn./FS / strips per box

Produkteigenschaften:

- vielseitig verwendbares elastisches Textilpflaster
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- luftdurchlässig
- hautverträglich und zuverlässig klebend

Properties:

- versatile applicable elastic textile plaster
- wound pad does not stick to the wound
- air-permeable
- skin friendly and reliably sticking

Wundpflaster Comfort und sensitiv (hypoallergen) / Wound Plaster Comfort and



- Versorgung kleiner Verletzungen bei besonders empfindlicher Haut
- zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riss- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- *treatment of small injuries for particularly sensitive skin*
- *cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts*

Wundpflaster wasserabweisend • robust / Wound Plaster Water Repellent •



- zur Versorgung von kleinen Verletzungen, die Verschmutzungen in feuchter Umgebung ausgesetzt sind
- zur Abdeckung von oberflächlichen Wunden, wie z.B. Schürf-, Riss- und Kratzwunden sowie kleinen Schnittverletzungen

Fields of application:

- *dirt and water repellent woven plaster for small injuries, which are exposed to dirty and moist surroundings*
- *cover of superficial wounds like abrasions, lacerations, scratches and small cuts*

Produkteigenschaften:

- sanft und anschmiegsam durch querelastisches, besonders weiches Polyester-Vliesmaterial
- Wundpflaster Comfort ist besonders hautfreundlich durch hypoallergene Polyacrylat-Klebmasse.
- Wundpflaster sensitiv mit Synthesekautschuk-Klebmasse
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- hautfreundlich und zuverlässig klebend
- hohe Luftdurchlässigkeit

Properties:

- soft and conformable through transverse elastic, especially sof polyester fleece material
- wound plaster Comfort is particularly skin friendly due to hypoallergenic polyacrylate adhesive
- wound plaster Sensitive with a synthetic caoutchouc adhesive mass
- wound pad does not stick to the wound
- skin friendly and reliably sticking; highly air-permeable

Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
Wundpflaster Comfort / Wound Plaster Comfort		
01589762	2 Größen / Sizes	20 Strips/FS / strips per box
	70 mm x 24 mm	12 Strips / strips per box
	70 mm x 48 mm	8 Strips / strips per box
Wundpflaster Mini sensitiv / Wound Plaster Mini Sensitiv		
05954879	4 cm x 1,7 cm	20 Strips/FS / strips per box
Wundpflaster sensitiv / Wound Plaster Sensitiv geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm		
04951175	1 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951181	50 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951198	1 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951206	1 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box
Rolle in Spenderschachtel / Dispencer Box		
04951212	5 m x 4 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951229	5 m x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box
04951235	5 m x 8 cm	1 Stück/FS / piece per box
Injektionspflaster / Injection Plaster		
04114025	4 cm x 1,7 cm	400 Abschn./FS / strips per box
00820950	7 cm x 2 cm	200 Abschn./FS / strips per box
Injektionspflaster Kindermotiv / Injection Plaster Children Blume / Marienkäfer Flower / Lady Beetle		
07118851	4 cm x 1,7 cm	400 Abschn./FS / strips per box
07139988	4 cm x 1,7 cm	400 Abschn./FS / strips per box

Produkteigenschaften:

- vielseitig verwendbares Polyethylen-Folienpflaster
- Das Trägermaterial ist schmutz- und wasserabweisend.
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- luftdurchlässig
- hautverträglich und zuverlässig klebend

Properties:

- versatile applicable polyethylene-film plaster
- the backing material is dirt and water repellent
- wound pad does not stick to the wound
- air-permeable
- skin friendly and reliably sticking

Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
geschnitten in Abschnitte zu 10 cm / Cut in strips á 10 cm		
07464754	1 m x 4 cm	10 Abschn./FS / strips per box
07464760	50 cm x 6 cm	5 Abschn./FS / strips per box
07464777	1 m x 6 cm	10 Abschn./FS / strips per box
07464808	1 m x 8 cm	10 Abschn./FS / strips per box
Strips/Abschnitte / Individually wrapped strips		
04051738	2 cm x 6 cm	10 Strips / strips
04580017	4 Größen / Sizes	18 Stück/FS / piece per box
	2,5 cm x 7,2 cm	2 Strips / strips
	1,9 cm x 7,2 cm	6 Strips / strips
	1,6 cm x 5,5 cm	6 Strips / strips
	9 cm x 3,8 cm	4 Strips / strips

GoTa-POR® Wundpflaster steril (hypoallergen) / GoTa-POR® Wound Dressing



Anwendungsgebiete:

- Als steriler Folgeverband nach chirurgischen Eingriffen oder Unfallverletzungen.

Fields of application:

- sterile wound dressing after surgery or accident injuries

GoTa-POR® PU-Wundfilm steril / GoTa-POR® PU-Woundfilm Sterile



Anwendungsgebiete:

- Als steriler wasserdichter Wundverband für die Versorgung sezernierender Wunden.

Fields of application:

- sterile waterproof dressing for the treatment of exuding wounds

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
04473250	50 mm x 72 mm	1 Stück / dressing
04473296	100 mm x 60 mm	1 Stück / dressing
04473600	100 mm x 80 mm	1 Stück / dressing
04473646	150 mm x 100 mm	1 Stück / dressing
04473669	200 mm x 100 mm	1 Stück / dressing
04473681	250 mm x 100 mm	1 Stück / dressing
04473706	300 mm x 100 mm	1 Stück / dressing

Klinikverpackungen / Hospital Packs

04473273	50 mm x 72 mm	50 Stück/FS / dressings per box
04473592	100 mm x 60 mm	50 Stück/FS / dressings per box
04473623	100 mm x 80 mm	50 Stück/FS / dressings per box
04473652	150 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
04473675	200 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
04473698	250 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box
04473712	300 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box

Klinikverpackungen hautfarben / Hospital Packs skin color

11240345	50 mm x 72 mm	50 Stück / dressing
11240374	100 mm x 60 mm	50 Stück / dressing

5er Packung weiß / 5 Pieces white

11240339	50 mm x 72 mm	5 Stück / dressing
11240368	100 mm x 60 mm	5 Stück / dressing

5er Packung hautfarben / 5 Pieces skin color

04473267	50 mm x 72 mm	5 Stück/FS / dressings per box
04473617	100 mm x 80 mm	5 Stück/FS / dressings per box

Produkteigenschaften:

- querelastisches Polyester-Vlies
- Zentrale Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
- umlaufende Klebefläche schützt Wunde von allen Seiten
- hautverträglich und zuverlässig klebend
- hohe Luftdurchlässigkeit

Properties:

- transversely elastic polyester fleece
- central wound pad does not stick to the wound
- continuous adhesive border gives allround wound protection
- skin-friendly and reliably sticking; highly air-permeable

GoTa-POR® PU-Wundfilm steril / GoTa-POR® PU-Woundfilm Sterile

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
03942122	50 mm x 72 mm	1 Stück / dressing
03942151	100 mm x 60 mm	1 Stück / dressing
03942168	150 mm x 100 mm	1 Stück / dressing

Klinikverpackungen / Hospital Packs

03182450	50 mm x 72 mm	50 Stück/FS / dressings per box
03182504	100 mm x 60 mm	50 Stück/FS / dressings per box
03182585	150 mm x 100 mm	50 Stück/FS / dressings per box

5er Packung weiß / 5 Pieces white

00468424	50 mm x 72 mm	5 Stück/FS / dressings per box
00468447	100 mm x 60 mm	5 Stück/FS / dressings per box
00468476	150 mm x 100 mm	5 Stück/FS / dressings per box

Produkteigenschaften:

- keim- und wasserdicht
- transparentes, atmungsaktives Trägermaterial
- passt sich den Körperkonturen gut an.

Properties:

- impermeable to microorganisms and waterproof
- conforms well to the body contours

GoTa-POR® Kanülenpflaster steril / GoTa-POR® IV (Intravenous) Attachment

Anwendungsgebiete:

- zur Fixierung periphervenöser Verweilkanülen/-katheter, die in oberflächliche, subkutan gelegene Venen am Unterarm o.ä. eingebracht sind

Fields of application:

- *securing of peripheral venous cannulae and catheters in subcutaneously placed veins at the for arm or similar sites*

Sterile

GoTa-POR® Kanülenpflaster steril / GoTa-POR® IV Attachment Sterile

Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
04473729	80 mm x 58 mm	1 Stück / pouch
Klinikverpackungen / Hospital Packs		
04473735	80 mm x 58 mm	50 Stück/FS / pouches per box

Produkteigenschaften:

- sanftes querelastisches Polyester-Vlies mit hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- saugfähige zentrale Wundauflage zur Polsterung des Kanülenschaftes
- hohe Luftdurchlässigkeit; hautverträglich und zuverlässig klebend
- schmerzlos und rückstandsfrei zu entfernen

Properties:

- soft transversely elastic polyester fleece with hypoallergenic polyacrylate adhesive
- absorbent central wound pad for cushioning of the cannula shaft
- highly air-permeable; skin friendly and reliably sticking
- can be removed painlessly and leaves no residues

GoTa-DERM® thin steril, GoTa-DERM® foam steril / GoTa-DERM® Thin Sterile,



Anwendungsgebiete:


- zur Versorgung von Hautgeschwüren der Stufe I - II (Decubitus und venösem Ulcus)
- Verbrennungen I. und II. Grades
- Sekundärverband für Füllmaterial
- Folgeverbände bei chirurgischen Eingriffen und Unfallverletzungen z.B. bei der Spalthautentnahme, bei der Wundversorgung nach Endoskopie, bei der plastischen Chirurgie, bei Schürfwunden (bis ins Fettgewebe)
- Verwendung als Schutzverband z.B. bei Diabetikern zur normalen Wundbehandlung anstatt diverser Wundpflaster
- Nicht anwenden bei sehr tiefen Biss- und Stichwunden, bei arteriellem Ulcus, bei freiliegenden Knochen und Sehnen !
- foam: vorbeugend zur Druckentlastung bei Decubitus

Fields of application:


- treatment of dermal ulcers degree I and II (decubitus and venous ulcers)
- burns of 1st and 2nd grade
- secondary dressing over hydrocolloid filling material
- surgical incisions and accident injuries, covering donor sites after split skin grafting, after endoscopy, plastic surgery, abrasions (as far as adipose tissue)
- protective dressing e.g. for diabetics as normal wound care instead of various dressings
- do not use in the treatment of very deep bites and stab wounds, arterial ulcer, wounds where tendons and bones are exposed
- foam: prophylactic pressure release with decubitus




hydroaktiv
hydroactive

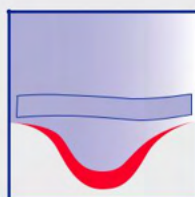

selbsthaftend
self adhesive

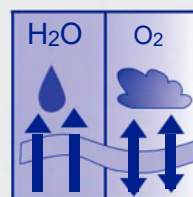

sauerstoff- und
wasserdampf-
durchlässig
permeable to
oxygen and
water vapour

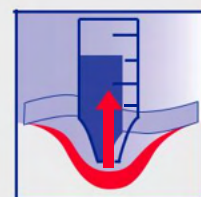

hohes Aufnah-
mevermögen
high absorptive
capacity

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

GoTa-DERM® thin

00166522	10 cm x 5 cm	1 Stück / piece
00166539	10 cm x 10 cm	1 Stück / piece
00166545	15 cm x 15 cm	1 Stück / piece

Klinikverpackungen / Hospital Packs

00176360	10 cm x 5 cm	10 Stück/FS / pieces per box
08880041	10 cm x 10 cm	10 Stück/FS / pieces per box
00176383	15 cm x 15 cm	5 Stück/FS / pieces per box

GoTa-DERM® foam

01340382	10 cm x 10 cm	1 Stück / piece
----------	---------------	-----------------

Klinikverpackungen / Hospital Packs

01308295	10 cm x 10 cm	10 Stück/FS / pieces per box
----------	---------------	------------------------------

Produkteigenschaften:

- Das Trägermaterial für GoTa-DERM® hydrokolloides Wundpflaster steril ist eine Polyurethanfolie.
- Als Haftklebstoff wird ein drucksensibler, permanent klebender, hypoallergener Haftklebstoff eingesetzt (Butylkautschuk, SIS-Copolymer, Polyisobutylene, Syntheseharze).
- Die in der Matrix eingearbeiteten Hydrokolloide sind Carboxymethylcellulose und Pektin.
- Als Schutz wird das Pflaster mit einem weißen, silikonisierten Papier abgedeckt.
- Undurchlässigkeit für Mikroorganismen von außen
- Entfernung überschüssiger Wundflüssigkeit
- Halten eines feuchten Klimas im Wundbereich
- Gewährleistung von Gasaustausch
- Blutgefäßneubildung wird induziert
- Entfernung ist schmerzfrei und atraumatisch, der Verband soll dabei überdehnt werden.
- Keine Hinterlassung von Haftklebstoffrückständen
- extra dünn (0,5 mm - 2,5 mm) und flexibel
- gute Klebkraft; muss beim Duschen nicht abgenommen werden
- gute, optimale Narbenbildung
- Kostenbeeinflussung durch nicht zu häufig notwendigen Verbandwechsel und durch Pflegezeiterparnis
- thin: transparent; die Wunde lässt sich gut beobachten
- foam: der Wundverband lässt sich gut anmodellieren, besonders an Problemzonen wie Ellenbogen, Knie, Knöchel, Ferse oder Zehen und bei abgemagerten Patienten.

Properties:

- the backing material of GoTa-DERM® hydrocolloid wound dressing sterile thin is a polyurethane film
- the adhesive mass is pressure sensitive, permanently sticking and transparent and consists of butyl caoutchouc, SIS-copolymer, polyisobutylene and synthetic resins
- the hydrocolloids in the matrix are carboxy-methylcellulose and pectin
- for protection the dressing is covered with a white siliconised paper
- impermeable to micro-organisms from outside
- removal of excess wound exudate
- maintenance of a moist wound environment
- allows for gaseous exchange
- formation of new blood vessels is induced
- removal is painless and atraumatic and the dressing should be overstretched for removal
- does not leave adhesive residues
- extra thin (0.5 - 2.5 mm) and flexible
- good adhesiveness; can be worn during showering
- good and cosmetically acceptable scar formation
- cost-effectiveness through less frequent dressing changes and saving of care time
- thin: transparent, easy observation of the wound
- foam: the dressing can be easily contoured particularly to problem zones such as elbows, knees, ankles, heels or toes and emaciated persons

GoTac® HydroGel-Pflaster, steril / GoTac® HydroGel-Dressing, Sterile



Anwendungsgebiete:


- für alle Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase
- modernste Versorgung zur Druck- und Schmerzlinderung
- für Blasen, Schnitt- und Schürfwunden

Fields of application:


- for all wounds in the granulation and epithelialization phases
- modern treatment for pressure relief and pain alleviation
- for blisters, cuts and abrasions






hydroaktiv
hydroactive

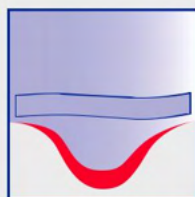


selbsthaftend
self adhesive

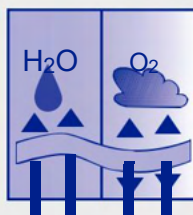

sauerstoff- und
wasserdampf-
durchlässig
permeable to
oxygen and
water vapour

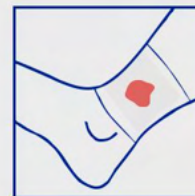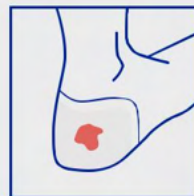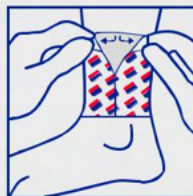

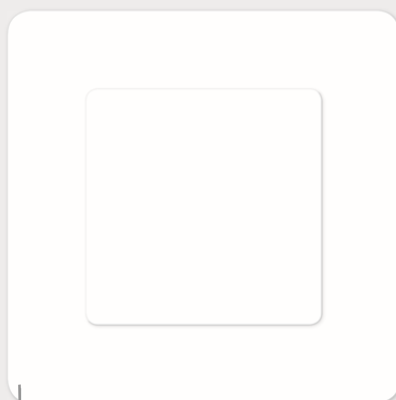**Lieferformen / How supplied**

PZN PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
01990068	10 cm x 10 cm	5 Stück/FS / pieces per box
01990370	10 cm x 10 cm	1 Stück/FS / pieces per box
oval		
10068358	10 cm x 7 cm	10 Stück/FS / pieces per box
10313444	10 cm x 7 cm	1 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- Das Trägermaterial für GoTac® HydroGel-Pflaster ist ein transparenter, hauchdünner Polyurethan-Film.
- Als Haftklebstoff wird ein transparenter, hypoallergener Haftklebstoff eingesetzt.
- Das HydroGel besteht aus Wasser, Glycerol und Polymeren.
- GoTac® HydroGel-Pflaster basiert auf dem Prinzip der feuchten Wundheilung, fördert eine schnelle Heilung und beugt einer Narbenbildung vor.
- Aufnahme von Wundsekret ohne die Wunde auszutrocknen
- gute Wundbeobachtung durch hohe Transparenz
- Verklebt nicht mit der Wunde, lässt sich schmerzlos entfernen.

Properties:

- the carrier material of GoTac® HydroGel-Dressing is a transparent, extremely thin polyurethane film
- the adhesive is transparent and hypoallergenic
- the hydrogel consists of water, glycerol and polymers
- GoTac® HydroGel-Dressing is based on the principle of moist wound healing, stimulates rapid healing and guards against scar formation
- absorption of wound exudate without desiccating the wound
- easy wound observation via high transparency
- does not stick to the wound and removal is painless



OsMo-med steril, Wundauflage mit Kapillarwirkung / *OsMo-med Sterile*

Anwendungsgebiete:

- OsMo-med ist für die Behandlung von stark exsudierenden Wunden mit Infektionsrisiko, chirurgischen Wunden, Druckgeschwüren, OP-Wunden, Karzinome mit normaler Wundumgebung und bei Verbrennungen geeignet.

Fields of application:

- *OsMo-med is indicated for the treatment of heavily exuding wounds at risk from infection, surgical wounds, pressure ulcers, operation sites, carcinoma with intact wound surroundings and burns.*

GoTa-sorb steril, Calciumalginat Wundauflage / *GoTa-sorb Sterile, Calcium*

Anwendungsgebiete:

- GoTa-sorb ist geeignet für die Versorgung von stark sezernierenden Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase, für oberflächliche und tiefe Wunden.

Fields of application:

- *GoTa-sorb is suitable for the treatment of heavily exuding wounds during the cleaning and granulation phase; for superficial and deep wounds.*

Lieferform / PZN	How supplied Länge x Breite Length x Width	Art Type	Inhalt Content
OsMo-med / OsMo-med			
09668840	7,5 cm x 7,5 cm	Wundpflaster / Wound Plaster	10 Stück/FS / pieces per box
08819248	15 cm x 15 cm	Wundpflaster / Wound Plaster	10 Stück/FS / pieces per box
08819395	15 cm x 20 cm	Wundauflage / Wound Plaster	10 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- OsMo-med nimmt durch die kapillare Polymerstruktur in kurzer Zeit große Mengen Flüssigkeit auf und speichert diese, ohne die Wunde auszutrocknen. Da das Wundexsudat durch die Auflage aufgenommen und unter Druck zuverlässig eingeschlossen wird, kann OsMo-med auch unter einem Kompressionsverband getragen werden. OsMo-med selbstklebend ist flexibel und sehr komfortabel an den äußeren Rändern mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Klebstoff beschichtet.

Properties:

- *due to the capillary polymer structure, OsMo-med absorbs large amounts of fluids within a short time and retains these without drying out the wound. OsMo-med can also be used under compression bandages, because the absorbed wound exudate is reliably locked up even under pressure. OsMo-med self-adhesive is flexible and highly comfortable coated with a super tolerated polyacrylate adhesive at the outer edges.*

Lieferform / PZN	How supplied Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
06979628	10 cm x 10 cm	10 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- GoTa-sorb Calciumalginat Wundauflage ist eine hoch flexible, sehr weiche, anschmiegsame Wundabdeckung, die sich hervorragend jeder Wundkontur anpasst. Die Calciumalginat-Fasern reagieren mit Wundexsudat oder Blut und bilden ein weiches, feuchtes Gel. Die vernetzte Struktur des Produktes erlaubt ein atraumatisches Entfernen des Gels in einem Stück.

Properties:

- *GoTa-sorb calcium alginate wound pad is a highly flexible, very soft and supple wound dressing which conforms excellently to the contours of every wound. The calcium alginate fibres react with wound exudate or blood and form a soft and moist gel. The interlaced structure of the product allows for the atraumatic removal of the gel in one piece.*

GoTa-FILM steril / GoTa-FILM Sterile



Anwendungsgebiete:

- ideale Wundabdeckung bei trockenen und schwach sezernierenden Wunden
- als Schutzverband zur Beschleunigung des Heilungsprozesses bei Vernarbung von Wunden wie Verbrennungen I. und II. Grades und Hauttransplantationen
- Inzisionsfolie im chirurgischen Umfeld
- zur Fixierung von Sonden, Kathetern und anderen Wundverbänden

Fields of application:

- *ideal wound cover for dry to low exuding wounds*
- *for the treatment of first or second degree burns donor sites, post-operative wounds and minor injuries like abrasions and lacerations*
- *incise drape for surgical interventions*
- *securing of sounds, catheters and other wound dressings*

Lieferformen / How supplied

PZN <i>PZN</i>	Länge x Breite <i>Length x Width</i>	Inhalt <i>Content</i>
04442373	50 mm x 72 mm	1 Stück / <i>dressing</i>
04442516	100 mm x 60 mm	1 Stück / <i>dressing</i>
04442545	150 mm x 100 mm	1 Stück / <i>dressing</i>
04442396	50 mm x 72 mm	5 Stück/FS / <i>dressings per box</i>
04442522	100 mm x 60 mm	5 Stück/FS / <i>dressings per box</i>
04442551	150 mm x 100 mm	5 Stück/FS / <i>dressings per box</i>

Klinikverpackungen / Hospital Packs

04442404	50 mm x 72 mm	50 Stück/FS / <i>dressings per box</i>
04442539	100 mm x 60 mm	50 Stück/FS / <i>dressings per box</i>
04442568	150 mm x 100 mm	50 Stück/FS / <i>dressings per box</i>

Produkteigenschaften:

- extra dünner, selbstklebender Polyurethanfilm
- transparent und elastisch ohne Verformung
- ständige Sichtkontrolle der Wunde
- perfekte Anpassung an alle Körperteile, sogar Gelenke
- steril und hypoallergen
- gute Haftfähigkeit, ohne die Wunde zu beschädigen
- optimale und dauerhafte Befestigung
- Verminderung der Infektionsgefahr
- Sauerstoff wird durch Wunde und Haut aufgenommen
- Zurückbehalten des Wundexsudats
- wirksamer Schutz und höchste Sicherheit bei der Anwendung

Properties:

- *extra thin self-adhesive polyurethane film*
- *transparent and elastic without deformation*
- *perfect adaptation to all body parts even to joints*
- *sterile and hypoallergenic*
- *good adhesion without damaging the wound*
- *optimal and long-lasting fixation*
- *reducing the risk of infection*
- *oxygen is absorbed by the wound and skin*
- *impermeable to fluids and permeable to gases and water vapour*
- *retention of wound exudate*
- *permanent visual control of the wound*
- *effective protection and high safety during application*

ZIP-Strip® Wundpflaster, wasserabweisend / ZIP-Strip® Wound Dressing, Water




Anwendungsgebiete:

- Zur Versorgung von kleinen Verletzungen, die Verschmutzungen in feuchter Umgebung ausgesetzt sind.

Fields of application:

- dirt and water repellent woven plaster for small injuries, which are exposed to dirty and moist surroundings

Gotha-PAD's Zellstofftupfer / Gotha-PAD's Cotton pads

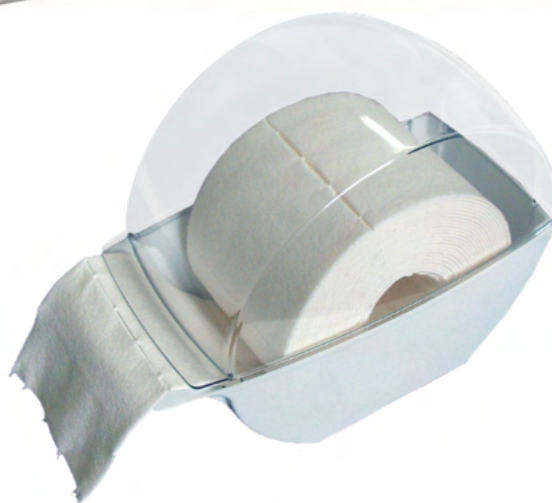

Anwendungsgebiete:

- zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen
- als Saugpolster bei kleinen Verletzungen

Fields of application:

- for hand cleaning before injections and infusions.
- as absorptive pad with minor injuries.



Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
01021381	72 mm x 25 mm	8 Strips/FS / strips per box


Produkteigenschaften:

- vielseitig verwendbares Folienpflaster
- Das Trägermaterial ist schmutz- und wasserabweisend.
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- hygienische Handhabung

Properties:

- versatile applicable film plaster
- the backing material is dirt and water repellent
- wound pad does not stick to the wound
- hygienic handling

Gotha-PAD's Zellstofftupfer / Gotha-PAD's Cotton pads

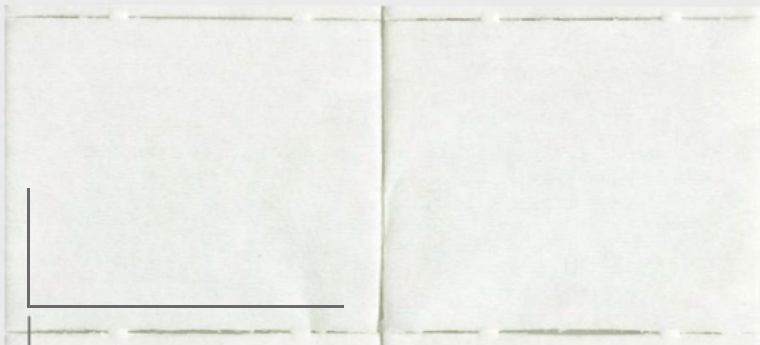


Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
08656059	Zellstofftupfer / Cellulose Pads 4 cm x 5 cm	2 x 500 Stück/Beutel / pads per pouch
08709293	Spenderbox / Dispenser Box	1 Box / box

Produkteigenschaften:

- Zellstoff-Tupfer von der Rolle, die gebrauchsfertig vorgestanzt sind.
- gebleichter Verbandzellstoff

Properties:

- cotton pads on rolls; prepunched for ease of use.
- beached surgical cotton.

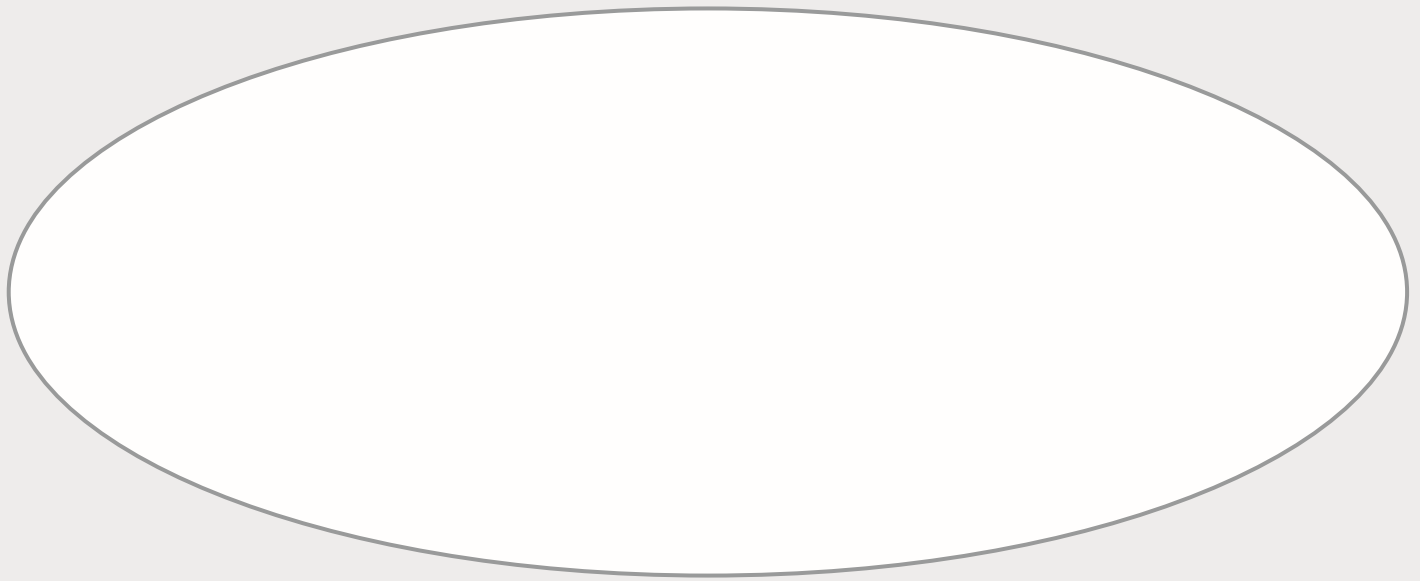

Anwendungsgebiete:

- Hervorragend zur Fixierung von Stütz- und Entlastungsverbänden sowie zur Prophylaxe und Therapie bei Sportverletzungen und zur Stützung des Bewegungsapparates im Alter geeignet.

Fields of application:

- *excellent for the fixation of support- and relief bandages as well as for prophylaxis and Therapy for sports injuries and support of the moving apparatus in old age.*

Lieferform / How supplied

PZN PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
GoTa-haft latexfrei / <i>GoTa-haft latex-free</i>		
09537374	4 cm x 20 m	1 Rolle/FS / <i>role per box</i>
09537380	6 cm x 20 m	1 Rolle/FS / <i>role per box</i>
09537397	8 cm x 20 m	1 Rolle/FS / <i>role per box</i>
09537405	10 cm x 20 m	1 Rolle/FS / <i>role per box</i>

Produkteigenschaften:

- luftdurchlässig, sehr elastisch, rutschfest,
- kohäsive selbsthaftende Fixierbinde für die Fixierung von Wundauflagen,
- unsteril, 40 % Baumwolle, 31 % Viskose, 29 % Polyamid
- Die korrekt angelegte Binde sitzt dauerhaft, schnürt nicht ein und lässt Blut zirkulieren.
- ideal als Sportbandage / Sportbinde – für alle Arten von Fixierverbänden

Properties:

- *air permeable, very elastic, non-slip, self-adhesive,*
- *cohesive self-adhesive fixation bandage for the fixation of wound dressings,*
- *non-sterile, 40% cotton, 31% viscose, 29% polyamide*
- *the correct binding is permanent, does not lace, and circulates blood.*
- *ideal as a sports bandage / sport band - for all types of fixation bandages*

Sport-, Handwerk-, Haushalts-, Reise-, Gärtnerbox / Sport-, Craftsman's-,



Anwendungsgebiete:

- Verschiedene Spezialpflaster für unterschiedliche Verletzungen im Alltag, in der Freizeit, auf Reisen oder während der Arbeit

Fields of application:

- several special plasters for different wounds in daily life, for leisure time, during travelling and work

Kinderpflaster, Tattoo-Pflaster / Children's Plaster, Tattoo-Plaster



Anwendungsgebiete:

- Trostpflaster für große und kleine Kinder bei Versorgung alltäglicher Bagatelverletzungen
- Diese Pflaster können bei Verletzungen, die Schmutz oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, angewendet werden.

Fields of application:

- comforting plasters for little and big children for the treatment of daily-life injuries
- these plasters can be used for wounds, which are exposed to dirt and moisture



Produkteigenschaften:

- Das Wundversorgungs-Programm deckt die unterschiedlichen Anwendungsbedürfnisse ab.
- speziell nach Form, Trägermaterial und Haftklebstoff sortierte Wundpflaster

Properties:

- the program of the plasters covers the need of different applications
- specially assorted wound plasters according to form, carrier material and adhesive

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Art	Inhalt
PZN	Length x Width	Type	Content

Sportbox / Sport Box

01994327	5 Größen / Sizes		20 Strips/FS / strips per box
	72 mm x 25 mm	Blasenpflaster / Blister Plaster	4 Strips / strips
	75 mm x 45 mm	Fingerkuppenpfl. / Fingertip Plaster	2 Strips / strips
	70 mm x 48 mm	Duschpflaster / Shower Plaster	2 Strips / strips
	60 mm x 60 mm	sensitiv / Sensitive	2 Strips / strips
	72 mm x 20 mm	wasserabweisend / Water Repellent	10 Strips / strips

Handwerkerbox / Craftsman's Box

07508262	4 Größen / Sizes		7 Strips/FS / strips per box
	50 cm x 6,0 cm	standard / Standard	1 Abschnitt / piece
	12 cm x 2,0 cm	Fingerverband / Finger Plaster	2 Strips / strips
	7,5 cm x 4,5 cm	Fingerkuppenpfl. / Fingertip Plaster	2 Strips / strips
	7,3 cm x 4,3 cm	Gelenkverband / Knuckle Plaster	2 Strips / strips

Haushaltsbox / Household Box

07508256	5 Größen / Sizes		16 Strips/FS / strips per box
	10 cm x 6,0 cm	standard / Standard	1 Abschnitt / piece
	10 cm x 6,0 cm	wasserabweisend / Water Repellent	1 Abschnitt / piece
	7,2 cm x 1,9 cm	transparent / Transparent	6 Strips / strips
	7,2 cm x 1,9 cm	wasserabweisend / Water Repellent	6 Strips / strips
	6,0 cm x 6,0 cm	sensitiv / Sensitive	2 Strips / strips

Reisebox / Traveller's Box

07229705	5 Größen / Sizes		30 Strips/FS / strips per box
	7,2 cm x 2,0 cm	standard / Standard	8 Strips / strips
	7,2 cm x 2,0 cm	wasserabweisend / Water Repellent	8 Strips / strips
	7,2 cm x 2,5 cm	wasserabweisend / Water Repellent	4 Strips / strips
	3,8 cm x 1,9 cm	wasserabweisend / Water Repellent	4 Strips / strips
	6,0 cm x 4,0 cm	wasserabweisend / Water Repellent	1 Strips / strips
	7,2 cm x 2,0 cm	transparent / Transparent	4 Strips / strips
	6,0 cm x 6,0 cm	sensitiv / Sensitive	1 Strips / strips

Gärtnerbox / Gardener's Box

00093131	3 Größen / Sizes		7 Strips/FS / strips per box
	7,2 cm x 2,5 cm	Blasenpflaster / Blister Plaster	2 Strips / strips
	7,5 cm x 4,5 cm	Fingerkuppenpfl. / Fingertip Plaster	4 Strips / strips
	50 cm x 6,0 cm	standard / Standard	1 Abschnitt / piece

Kinderpflaster-Pflaster / Children's Plaster



Produkteigenschaften:

- hautverträglich und zuverlässig klebend
- Die Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- Wundauflagen aus saugfähigem Vlies
- schmutz- und wasserabweisend
- besonders hautfreundlich durch Polyacrylat- bzw. Synthese-Kautschuk-Klebmasse

Properties:

- skin friendly and reliably sticking
- wound pad does not stick to the wound
- wound pad of absorbent fleece
- dirt and waterrepellent
- particularly skin friendly through polyacrylate or synthetic caoutchouc adhesive mass

PZN	Länge x Breite	Art	Inhalt
PZN	Length x Width	Type	Content

Kinderpflaster Bärchen / Children's Plaster Bear

00541167	3 Größen / Sizes		12 Stück/FS / strips per box
	2,0 cm x 7,0 cm		6 Strips / strips
	3,8 cm x 7,0 cm		4 Strips / strips
	6,0 cm x 10,0 cm		2 Strips / strips

zum Zuschneiden / for cutting

01264698	1,0 cm x 6,0 cm		1 Stück/FS / piece per box
----------	-----------------	--	----------------------------

Tattoo-Pflaster / Tattoo-Plaster

10934525	2,5 cm x 5,7 cm		8 Strips / strips per box
----------	-----------------	--	---------------------------

Kinderpflaster Maus / Children's Plaster Mouse

04737594	2,0 cm x 4,0 cm		20 Strips / strips per box
----------	-----------------	--	----------------------------

Blasenpflaster (hypoallergen) / *Blister Plaster* (hypoallergenic)



Anwendungsgebiete:

- Schutz vor Druck und Reibung durch besonders weiche aufgeschäumte Polyethylen-Folie
- Blasenpflaster bieten einen effektiven Schutz bei Hautblasen und wundgescheuerter Haut.

Fields of application:

- *protection against pressure and friction through soft and foamed polyethylene foil*
- *blister plasters provide effective protection of blisters and sore skin*

GoTac® HydroGel-Pflaster / *GoTac® HydroGel-Plaster*




Anwendungsgebiete:

- modernste Versorgung zur Druck- und Schmerzlinderung
- für Blasen, Schnitt- und Schürfwunden

Fields of application:

- *the most modern wound care to relieve pressure and pain*
- *for blisters, cuts and abrasions*

Blasenpflaster / Blister Plaster

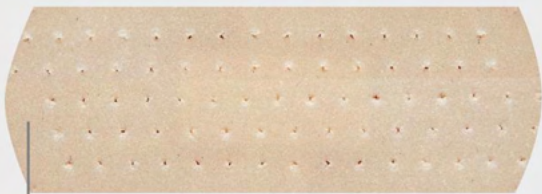

Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
07430471	2 Größen / Sizes	10 Stück/FS / strips per box
	1,9 cm x 7,2 cm	6 Strips / strips
	2,5 cm x 7,2 cm	4 Strips / strips


Produkteigenschaften:

- Blasenpflaster sind besonders hautfreundlich durch Polyacrylat-Klebmasse auf Folie.
- Die saugfähige Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde.
- wasser- und schmutzabweisend

Properties:

- skin friendly through polyacrylate adhesive mass on foil
- absorbent wound pad does not stick to the wound
- water and dirt repellent

GoTac® HydroGel-Pflaster / GoTac® HydroGel-Plaster

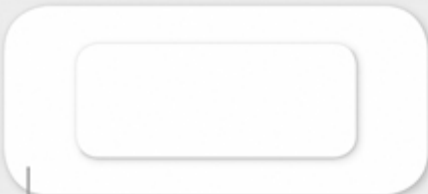

Lieferformen / How supplied				
PZN	Länge x Breite		Art	Inhalt
PZN	Length x Width		Type	Content
02033311	2 Größen / Sizes			8 Stück/FS / strips per box
	74 mm	x 45 mm	oval / oval	4 Strips / strips
	74 mm	x 45 mm	viereckig / rectangular	4 Strips / strips
02856797	74 mm	x 45 mm	oval / oval	6 Strips / strips

Produkteigenschaften:

- transparent, hauchdünn und superweich
- schnelle Wundsekretaufnahme; Hilft schnell heilen
- kühlend durch Gel-Kern
- sitzt wie eine zweite Haut
- beste Klebequalität
- schmerzloser Pflasterwechsel

Properties:

- transparent, paper-thin and super soft
- fast exudate absorption; helps to heal quickly
- cooling through gel-core
- fits like a second skin
- best adhesive quality
- painless plaster change



Wundpflaster transparent / Wound Plaster Transparent



Anwendungsgebiete:

- Effektiver Schutz vor Wasser und Schmutz

Fields of application:

- Effective protection from water and dirt

Wundpflaster soft Vlies (hypoallergen) / Wound Plaster Soft Fleece (hypoallergenic)



Anwendungsgebiete:

- Zur Abdeckung von oberflächlichen kleinsten Wunden, kleinen Schnittverletzungen
- Zur Abdeckung nach Injektionen

Fields of application:

- Cover of smallest superficial wounds and small cuts
- Cover after injections



Lieferformen / How supplied

PZN PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
00412487	ø 2,5 cm	20 Stück/FS / pieces per box


Produkteigenschaften:

- transparent, flexibel, atmungsaktiv, anschmiegsam
- besonders hautfreundlich durch Polyacrylat-Klebmasse
- Die Wundaufgabe besteht aus einem saugfähigen Vlies.

Properties:

- *transparent, flexible, breathable, conformable*
- *skin friendly through polyacrylate adhesive mass on PU foil*
- *the wound pad consists of an absorbent fleece*

Wundpflaster soft Vlies / Wound Plaster Soft Fleece

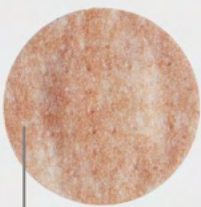

Lieferformen / How supplied

PZN PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
01456280	ø 2,5 cm	20 Stück/FS / pieces per box

Produkteigenschaften:

- hypoallergenes Wundpflaster mit besonders anschmiegsamem, hautfarbenen Vlies
- zentrale Wundaufgabe, rundum klebend
- verklebt nicht mit der Wunde
- luftdurchlässig
- hautfreundlich und zuverlässig klebend

Properties:

- *hypoallergenic wound plaster with highly conformable skin coloured fleece*
- *central wound pad, all-round sticking*
- *does not stick to the wound*
- *air-permeable*
- *skin friendly and reliably sticking*

Gotha-FIX® stretch / Gotha-FIX® Stretch



Anwendungsgebiete:

- Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, besonders an bewegten Körperpartien und Gelenken
- Zur Befestigung von großflächigen Verbänden, Kathetern

Fields of application:

- Full area retention of dressings, especially on moving body parts and joints
- Retention of large area dressings, catheters

Duschpflaster XL / Shower Plaster XL



Anwendungsgebiete:

- Effektiver Schutz vor Wasser und Schmutz

Fields of application:

- Effective protection from water and dirt



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

Spenderschachtel / Dispenser Box

06887205	10 m x 5 cm	1 Rolle/FS / roll per box
06887211	10 m x 10 cm	1 Rolle/FS / roll per box
06887228	10 m x 15 cm	1 Rolle/FS / roll per box
01873983	2 m x 10 cm	1 Rolle/FS / roll per box


Produkteigenschaften:

- Das sanfte Vliespflaster mit einem hypoallergenen Polyacrylat-Klebstoff bei empfindlicher Haut
- anschmiegsam durch querelastisches, besonders weiches Polyester-Vlies
- paßt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an; faltenfrei anlegbar
- luftdurchlässig

Properties:

- soft fleece tape with hypoallergenic polyacrylate adhesive for sensitive skin
- conformable through transversely elastic, especially soft polyester fleece
- conforms well over strongly contoured body parts; application without folds
- air-permeable

Duschpflaster XL / Shower Plaster XL

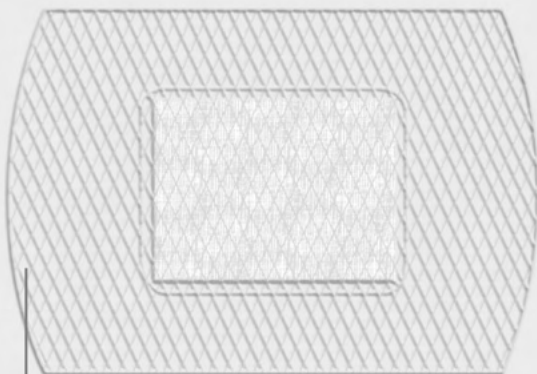

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

01605403	70 mm x 48 mm	10 Stück/FS / pieces per box
----------	---------------	------------------------------

Produkteigenschaften:

- transparent, flexibel, atmungsaktiv, anschmiegsam
- besonders hautfreundlich durch Polyacrylat-Klebmasse auf PU-Folie
- Die Wundauflage besteht aus einem saugfähigen Vlies.

Properties:

- transparent, flexible, breathable, conformable
- skin friendly through polyacrylate adhesive mass on PU foil
- the wound pad consists of an absorbent fleece

Fingerkuppenpflaster, Fingerpflaster / *Fingertip Plaster, Finger Plaster*



Anwendungsgebiete:

- **Fingerpflaster** sind durch die extra lange Form besonders bei Verletzungen an vielbewegten Fingergelenken geeignet
- **Fingerkuppenpflaster** bieten durch besondere Flügelform einen effektiven Schutz bei Verletzungen an Fingern, Finger- und Zehenkuppen

Fields of application:

- **Finger plasters** with extra long form are especially suited for wounds on much moved finger joints
- **Fingertip plasters** offer effective protection of wounds on fingers, fingertips and toetips through the special wing form

Saniflex® Fingerlinge / *Saniflex® Finger Cots*



Anwendungsgebiete:

- Schützt den Finger vor vielen aggressiven Agenzien und hautschädigenden Einwirkungen
- Der optimale Fingerschutz für die Wundversorgung
- Fingerling kurz in der Hand erwärmen, dann überziehen

Fields of application:

- Protects finger against a lot of aggressive agents and skin damaging effects
- The optimal finger protection during wound treatment
- Briefly warm up the finger cot in the hand, then put it on

Fingerkuppenpflaster, Fingerpflaster / Fingertip Plaster, Finger Plaster

Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content

Fingerkuppenpflaster / Fingertip Plaster

07669918	2 Größen / Sizes	10 Stück/FS / pieces per box
	4,0 cm x 6,0 cm	6 Stück / pieces
	4,5 cm x 7,5 cm	4 Stück / pieces

Fingerpflaster / Finger Plaster

04409944	2,0 cm x 12 cm	10 Stück/FS / pieces per box
----------	----------------	------------------------------

Fingerkuppenpflaster mit Fingerling / Fingertip Plaster with Finger Cots

01128452	2 Größen / Sizes	10 Stück/FS / pieces per box
	4,0 cm x 6,0 cm	6 Stück / pieces
	4,5 cm x 7,5 cm	4 Stück / pieces
	Fingerling / Finger Cots	2 Stück / pieces

Produkteigenschaften:

- luftdurchlässig
- hautverträglich und zuverlässig klebend
- Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
- durch Spezialformen leicht anlegbare Pflaster
- elastisches, anschmiegsames Textilpflaster bietet Wundschutz von allen Seiten

Properties:

- air-permeable
- skin friendly and reliably sticking
- wound pad does not stick to the wound
- special forms for easy placement of plaster
- elastic, conformable textile plaster allows for wound protection from all sides

Saniflex® Fingerlinge / Saniflex® Finger Cots

Lieferformen / How supplied

PZN	Größe	Inhalt
PZN	Size	Content

02023123	Universalgröße / Universal Size	6 Stück/FS / pieces per box
----------	---------------------------------	-----------------------------

Produkteigenschaften:

- beeinträchtigt auch bei ständigem Gebrauch die Blutzirkulation in keinsten Weise
- bestehen aus thermoplastischen Kunstharz
- latexfrei
- physiologisch unbedenklich
- wasserdicht
- erhalten ein hohes Fingerspitzengefühl
- schützt vor Schmutz und Nässe

Properties:

- do not impage blood-circulation in case of regular use
- consist of thermoplastic resin
- latex-free
- physiologically safe
- waterproof
- provide high fingertip sensitivit
- protect against dirt and moisture

Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe Latex / Rotpunkt® Examination Gloves



Fields of application according to DIN EN 455 T 1-3, EN 374-2:

examination gloves must be worn during the following activities:

- wound care, dressing changes
- small surgical interventions
- aseptic operation preparation
- during rectal or gynecological interventions
- placing of catheters, drawing blood
- preparation of medicaments
- working with disinfectants and detergents

Anwendungsgebiete lt. DIN EN 455 T 1-3, EN 374-2:

Untersuchungshandschuhe müssen z.B. bei folgenden Tätigkeiten getragen werden:

- Wundversorgung, Verbandwechsel
- kleine chirurgische Eingriffe
- aseptische OP-Vorbereitung
- bei rektalen oder gynäkologischen Eingriffen
- legen von Kathetern, Blutabnahme
- beim Ansetzen von Medikamenten
- bei der Arbeit mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln

Rotpunkt® Untersuchungshandschuhe Nitril / Rotpunkt® Examination Gloves



Fields of application according to DIN EN 455 T 1-2, EN 374-2:

Examination gloves must be worn during the following activities:

- nitrile is synthetically produced latex and free from allergenic proteins and is therefore suited for persons with diagnosed latex allergy

Anwendungsgebiete lt. DIN EN 455 T 1-2, EN 374-2:

- insbesondere für Träger, aber auch Patienten mit Latex-Allergien



Lieferformen / How supplied				
PZN	Größe			Inhalt
PZN	Size			Content
Klinikverpackungen / Hospital Box				
01670754	XS	sehr klein / extra small	5 - 5½	100 Stück/Box / gloves per box
01415387	S	klein / small	6 - 6½	100 Stück/Box / gloves per box
01426103	M	mittel / medium	7 - 7½	100 Stück/Box / gloves per box
01426126	L	groß / large	8 - 8½	100 Stück/Box / gloves per box
01670760	XL	sehr groß / extra large	9 - 9½	100 Stück/Box / gloves per box

Produkteigenschaften:

- polymerbeschichteter dünner Latex
- puderfrei
- unsteril
- proteinarm
- hohe Griffsicherheit
- exzellente Passform
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Tastsensibilität
- bestmögliche Hautverträglichkeit
- leicht anzuziehen
- beidhändig tragbar
- mit Rollrand

Properties:

- *polymer coated thin latex*
- *powder free*
- *non sterile*
- *low protein content*
- *high gripping power*
- *excellent fit*
- *high resistance to tearing*
- *very good sense of touch*
- *optimum compatibility with skin*
- *easy to put on*
- *ambidextrous*
- *rolled edges*



Lieferformen / How supplied				
PZN	Größe			Inhalt
PZN	Size			Content
Klinikverpackungen / Hospital Box				
06892330	XS	sehr klein / extra small	5 - 5½	100 Stück/Box / gloves per box
06892347	S	klein / small	6 - 6½	100 Stück/Box / gloves per box
06892436	M	mittel / medium	7 - 7½	100 Stück/Box / gloves per box
06892471	L	groß / large	8 - 8½	100 Stück/Box / gloves per box
06892531	XL	sehr groß / extra large	9 - 9½	100 Stück/Box / gloves per box

Produkteigenschaften:

- puderfrei
- unsteril
- hohe Griffsicherheit
- exzellente Passform
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Tastsensibilität
- beidhändig tragbar
- frei von allergenen Proteinen
- leicht anzuziehen

Properties:

- *powder free*
- *non sterile*
- *high gripping power*
- *excellent fit*
- *high resistance to tearing*
- *very good sense of touch*
- *ambidextrous*
- *free from allergenic proteins*
- *easy to put on*



**Anwendungsgebiete
lt. DIN EN 455 T 1-2, EN 374-2:**

Untersuchungshandschuhe müssen z.B. bei folgenden Tätigkeiten getragen werden:

- Wundversorgung, Verbandwechsel
- kleine chirurgische Eingriffe
- aseptische OP-Vorbereitung
- bei rektalen oder gynäkologischen Eingriffen
- Legen von Kathetern, Blutabnahme
- beim Ansetzen von Medikamenten
- bei der Arbeit mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln

**Fields of application according to
DIN EN 455 T 1-2, EN 374-2:**

examination gloves must be worn during the following activities:

- *wound care, dressing changes*
- *small surgical interventions*
- *aseptic operation preparation*
- *during rectal or gynecological interventions*
- *placing of catheters, drawing blood*
- *preparation of medicaments*
- *working with disinfectants and detergents*



Lieferformen / How supplied				
PZN	Größe			Inhalt
PZN	Size			Content
01026881	S	klein / small	6 - 6½	100 Stück/Box / gloves per box
01026898	M	mittel / medium	7 - 7½	100 Stück/Box / gloves per box
01026906	L	groß / large	8 - 8½	100 Stück/Box / gloves per box

Produkteigenschaften:

- Vinyl
- puderfrei
- unsteril
- frei von allergenen Proteinen
- hohe Griffsicherheit
- exzellente Passform
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Tastsensibilität
- leicht anzuziehen
- beidhändig tragbar
- mit Rollrand

Properties:

- vinyl
- powder free
- non sterile
- free of allergenic proteins
- high gripping power
- excellent fit
- high resistance to tearing
- very good sense of touch
- easy to put on
- ambidextrous
- rolled edges

Capsi-med® Wärmepflaster / Capsi-med® Heat Plaster



Anwendungsgebiete:

- Nonivamid, ein Wirkstoff des Cayennepeffers, wird angewendet zur lokalen Wärmebehandlung bei rheumatischen Muskel- und Gelenksbeschwerden wie z.B. Ischias, Hexenschuß und Nackensteifigkeit sowie bei schmerzhaften Muskelverspannungen im Schulter-Arm-Bereich sowie im Bereich der Wirbelsäule.

Fields of application:

- Nonivamide, one of the active ingredients of Cayenne pepper, is applied for the local treatment of rheumatic muscle and joint conditions, e.g. sciatica, lumbago and stiff neck as well as painful muscle sprains affecting the shoulder-arm area and the vertebra.

Hühneraugenpflaster, Hornhautpflaster / Corn Remover, Callus Remover




Anwendungsgebiete:

- Zur Auflösung der Hornsubstanz
- Bei Schwielen und Hornhautverdickungen sowie Hühneraugen

Fields of application:

- For dissolving the callous substance
- For calluses and corns

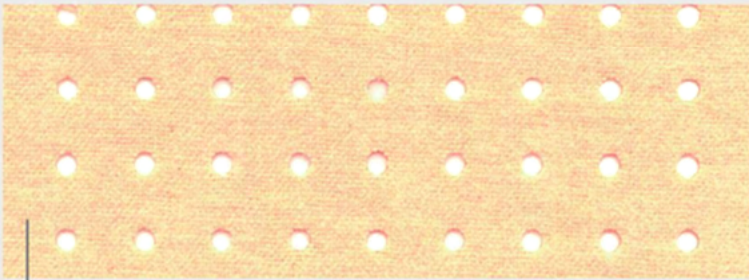

Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content
05867873	11 cm x 18 cm	1 St ück / piece

Produkteigenschaften:

- wirkt direkt an der betreffenden Schmerzstelle
- gleichbleibender Wirkstoffgehalt durch wohldefinierte aktive Substanz
- spendet wohltuende Wärme durch Aktivierung der Körperwärme
- sehr selten auftretende Nebenwirkungen
- lässt sich individuell zuschneiden

Properties:

- *directly acts at the site of pain*
- *constant content of active ingredient due to well defined substance*
- *provides comforting warmth through activation of body warmth*
- *very rarely occuring side effects*
- *can be cut to individual size*

Hühneraugenpflaster, Hornhautpflaster / Corn Remover, Callus Remover



Lieferformen / How supplied		
PZN	Länge x Breite Length x Width	Inhalt Content

Hühneraugenpflaster / Corn Remover		
06339722	2 cm x 6 cm	5 Stück/FS / strips per box

Hornhautpflaster / Callus Remover		
04079174	10 cm x 6 cm	1 Stück/FS / piece per box

Produkteigenschaften:

- Die Wirkstoffklebemasse enthält 40% Salicylsäure.
- Trägermaterial aus hautfarbenem, starren Textilgewebe
- Zuverlässig klebend, aber problemlos ablösbar
- Hornhautpflaster lässt sich individuell zuschneiden.
- Hühneraugenpflaster in applikationsgerechtem Zuschnitt

Properties:

- *the adhesive mass contains 40% salicylic acid*
- *backing material is a skin coloured, rigid woven fabric*
- *reliably sticking and easily removable*
- *callus remover can be individually cut to size*
- *corn remover in application adapted size*

Heftpflaster standard / Adhesive Tape Standard



Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares Textilpflaster zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe und für Streckverbände

Fields of application:

- Versatile applicable textile tape for the retention of dressings of every type and size and extension bandages

Heftpflaster Vlies / Adhesive Tape Fleece



Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares, besonders hautfreundliches Fixierpflaster
- Zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe sowie von Elektroden und sonstigen-Meßelementen

Fields of application:

- Versatile applicable, especially skin friendly retention tape
- Retention of dressings of every type and size, electrodes and other measuring devices


Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
04051336	5 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
04051342	5 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
04051359	5 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box
04092045	5 m x 1,25 cm	1 Rolle/FS / roll per box
04092051	5 m x 2,5 cm	1 Rolle/FS / roll per box


Produkteigenschaften:

- hautfarbenes Fixierpflaster mit Zinkoxid-Naturkautschuk-Klebmasse
- hohe Widerstandsfähigkeit; außergewöhnlich zugfest
- haftet auch bei starker Belastung fest und sicher
- hohe Sofort- und Dauerklebkraft
- wasserabweisende Oberfläche
- hautverträglich
- luftdurchlässig

Properties:

- *skin-coloured retention tape with zinc oxide natural caoutchouc adhesive*
- *high resistance; extraordinary tensile strength*
- *adheres strongly and securely even under heavy strain*
- *high instant and permanent adhesiveness*
- *water repellent surface*
- *skin friendly*
- *air-permeable*

Heftpflaster Vlies / Adhesive Tape Fleece

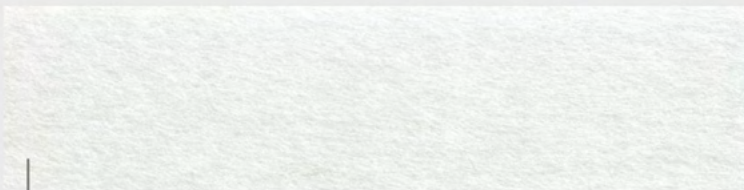
Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
04079151	10 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
04051371	10 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
04051365	10 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box
10068364	10 m x 1,25 cm	1 Rolle/FS / roll per box
10068370	10 m x 2,5 cm	1 Rolle/FS / roll per box

Klinikverpackungen (ohne Seitenscheiben und Schutzring) / Hospital Box (without side guards and cover)

07105417	10 m x 1,25 cm	24 Rollen/FS / rolls per box
07105423	10 m x 2,5 cm	12 Rollen/FS / rolls per box


Produkteigenschaften:

- weißes Vliesgewebe mit hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- für extrem empfindliche Haut
- sehr gut luftdurchlässig
- gute Sofort- und Dauerklebkraft
- schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- leicht von Hand reißbar
- besonders hautfreundlich und zuverlässig klebend

Properties:

- *white non-woven fabric with hypoallergenic polyacrylate adhesive*
- *for particularly sensitive skin*
- *highly air-permeable*
- *good instant and permanent adhesiveness*
- *painless removal without leaving residues*
- *easily torn by hand*
- *skin friendly and reliably sticking*

Gotha-SILK Heftpflaster Seide / Gotha-SILK Adhesive Tape Silk

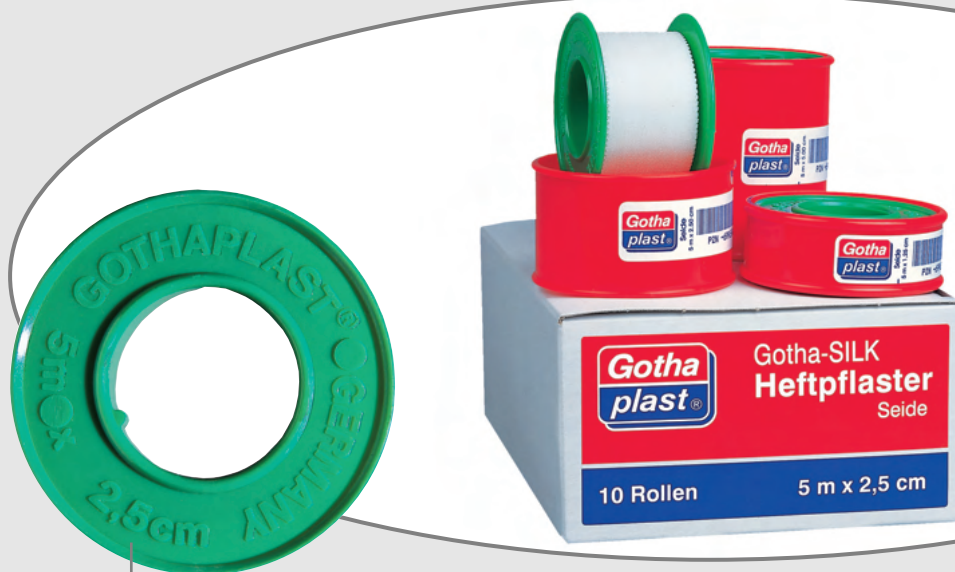

Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares, besonders hautfreundliches Fixierpflaster
- Zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe
- Problemlose Befestigung und Sicherung von Kathetern, Sonden und Kanülen

Fields of application:

- Versatile applicable, especially skin friendly retention tape
- Retention of dressings of every type and size
- Securement of catheters, probes and canulae without problems

Gotha-FLEX Heftpflaster transparent / Gotha-FLEX Adhesive Tape Transparent



Anwendungsgebiete:

- Vielseitig verwendbares, besonders hautfreundliches Fixierpflaster
- Zum Fixieren von Verbänden jeder Art und Größe sowie von Kanülen, Sonden und Kathetern

Fields of application:

- Versatile applicable, especially skin friendly retention tape
- Retention of dressings of every type and size as well as cannulae, probes and catheters



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
06996532	5 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
06996549	5 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
06996555	5 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box
10068387	5 m x 1,25 cm	1 Rollen/FS / rolls per box
10068393	5 m x 2,5 cm	1 Rollen/FS / rolls per box

Klinikverpackungen (ohne Seitenscheiben und Schutzring) / Hospital Box (without side guards and cover)

07105340	10 m x 1,25 cm	24 Rollen/FS / rolls per box
07105357	10 m x 2,5 cm	12 Rollen/FS / rolls per box
07105363	10 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box

Produkteigenschaften:

- weißes Seidengewebe mit Zick-Zack-Rand und hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- für empfindliche Haut; sehr gut luftdurchlässig
- gute Sofort- und Dauerklebkraft;
- schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- leicht und akkurat von Hand reißbar; gut beschriftbar
- neutral gegenüber Kunststoff und Gummi

Properties:

- white silk fabric with zigzag border and hypoallergenic polyacrylate adhesive
- for sensitive skin; highly air-permeable
- good instant and permanent adhesiveness
- painless removal without leaving residues
- easily torn by hand; easy to write on
- inert to plastics and rubber

Gotha-FLEX Heftpflaster transparent / *Gotha-FLEX Adhesive Tape Transparent*



Lieferformen / How supplied

PZN	Länge x Breite	Inhalt
PZN	Length x Width	Content
06996590	10 m x 1,25 cm	16 Rollen/FS / rolls per box
06996609	10 m x 2,5 cm	10 Rollen/FS / rolls per box
06996615	10 m x 5,0 cm	6 Rollen/FS / rolls per box
09213884	10 m x 1,25 cm	1 Rollen/FS / rolls per box
09213915	10 m x 2,5 cm	1 Rollen/FS / rolls per box

Produkteigenschaften:

- transparente, microperforierte PE-Folie mit hypoallergener Polyacrylat-Klebmasse
- für besonders empfindliche Haut
- sehr gut luftdurchlässig
- gute Sofort- und Dauerklebkraft
- schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar
- leicht von Hand reißbar
- wasserabweisend

Properties:

- transparent, microperforated PE film with hypoallergenic polyacrylate adhesive
- for extremely sensitive skin
- highly air-permeable
- good instant and permanent adhesiveness
- painless removal without leaving residues
- easily torn by hand
- water repellent



Angaben zu Displaygrößen: / Display Dimensions:

	Breite / Width		Höhe / High		Tiefe / Depth	
• Display A	40 cm	x	195 cm	x	33 cm	
• Display B	30 cm	x	10 cm	x	20 cm	
• Display C	16 cm	x	21 cm	x	10 cm	
• Display D	21 cm	x	5 cm	x	35 cm	
• Display E	10 cm	x	40 cm	x	20 cm	
• Display F	10 cm	x	40 cm	x	20 cm	
• Display G	10 cm	x	40 cm	x	20 cm	



Gothaplast® Akademie

Die Gothaplast® Akademie begann Aktivitäten im Jahre 2001. Seitdem werden wissenschaftliche Seminare zu wechselnden Fachthemen, die große Akzeptanz finden, durchgeführt.

Das Betätigungsfeld der Akademie ist die Fortbildung medizinischen Fachpersonals in Kooperation mit den staatlichen Institutionen, wie den Landesärztekammern, die diese Vorträge in ihr Punktesystem einbeziehen und die Teilnahme innerhalb der freiwilligen Fortbildung zertifizieren.

In die Aktivitäten der Gothaplast® Akademie sind Wissenschaftler der Fachrichtungen Medizin, Chemie und Biologie eingebunden. Inhalt der Seminare der modernen Wundversorgung ist die effektive Behandlung von chronischen Wundheilungsstörungen unter ökonomischen Aspekten.

Auch außerhalb Deutschlands ist die Gothaplast® Akademie aktiv.

Gothaplast® Academy

Gothaplast® Academy started its activities in 2001. Since then sci-entific seminars on changing topics are hold which are very well accepted.

The field of activities of the Gothaplast® Academy focuses on the education of medical personnel in cooperation with governmental institutions like the federal medical societies which include the lec-tures in their point system and certify the participation within the scope of the voluntary education.

Scientists from various branches like medicine, chemistry, biology are incorporated in the Academy's activities. The subject of the se-minars on modern wound management is the effective treatment of chronic wound healing disturbances and its impact on econo-mical aspects.

Outside Germany the Gothaplast® Academy is also active.



Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH
Hans-C.-Wirz-Straße 2
99867 Gotha / Germany

Telefon: +049 (0) 36 21 / 30 65-0
Telefax: +049 (0) 36 21 / 30 65-30

gebührenfreie / toll-free Hotline:
Telefon: 08 00 / 5 05 35 11
Telefax: 08 00 / 5 05 25 11

E-mail: info@gothaplast.de
Internet: www.gothaplast.de